




QuikRead go easy CRP

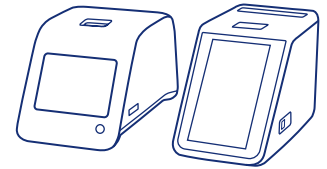


Voor QuikRead go Instrument en QuikRead go Plus Instrument

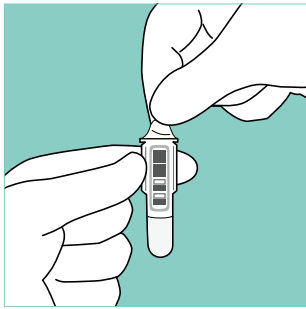


1 Verwijder de beschermfolie. Raak de doorzichtige oppervlakken van de cuvet (optisch gedeelte) niet aan.

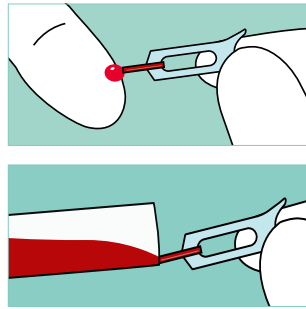


2 Houd de sample collector 10 µl bijna horizontaal en plaats de punt net onder het oppervlak van de bloeddruppel. Vul het capillaire gedeelte volledig.

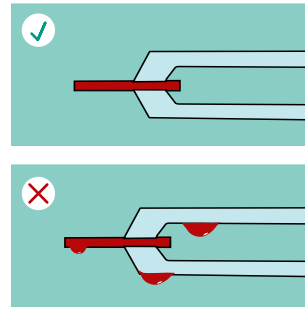


Let op! Controleer of het capillair volledig gevuld is en of er geen luchtbellen in zitten. Veeg de sample collector niet af! Zit er sample aan de buitenkant van de collector, gooi deze dan weg en neem een nieuwe.

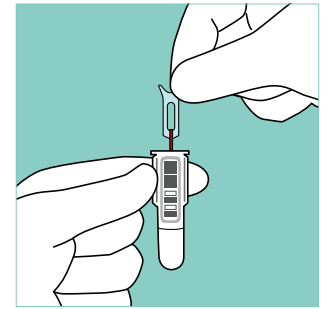


3 Plaats de sample collector binnen 2 min in de cuvet.

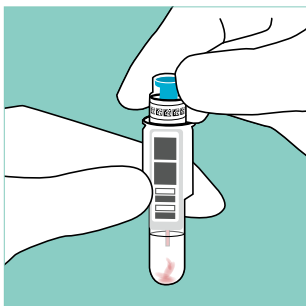

4 Sluit de cuvet af met de CRP reagens dop. Druk het blauwgroene gedeelte van de dop niet in. Test binnen 2 uur uitvoeren. Cuvet rechtophouden en niet schudden! Bij transport rode dop gebruiken!

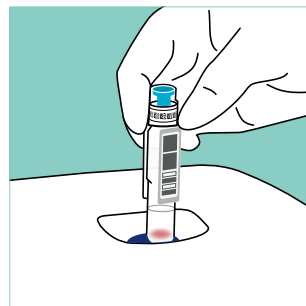


5 Kies Meten / Monster meten op het scherm van het QuikRead go instrument. Plaats de cuvet met de barcode naar voren gericht in het apparaat.

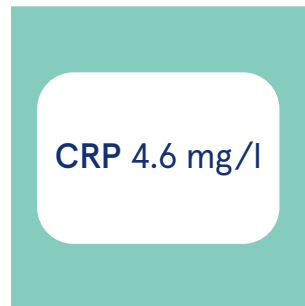

6 De meettijd bedraagt 2 minuten. Het resultaat wordt weergegeven op het scherm en de cuvet komt automatisch omhoog wanneer de meting voltooid is.

Lees de volledige bijsluiter voordat u de test gaat gebruiken.

QuikRead go easy CRP

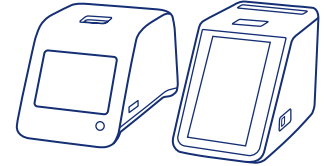

Kit

Ongeopende kit 2-25°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit



Koker met reagent caps

Ongeopende koker 2-25°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit
Na openen 2-25°C: 6 maanden



Cuvetten

Ongeopende folie verpakking 2-25°C: zie houdbaarheidsdatum op de kit

Ongeopende cuvetten na openen van de folie verpakking:
2-8°C: 6 maanden / 18-25°C: 3 maanden



Open cuvet

Buffer op temperatuur laten komen 18-25°C
Test binnen 2 uur uitvoeren na openen van de cuvet
Sample is 2 uur stabiel in de buffer



Sample collectors

Bewaren bij 2-25°C, houdbaarheidsdatum staat op de verpakking van de QuikRead go Sample Collector 10µl doos



CRP controles

Ongeopend 2-8°C: zie houdbaarheidsdatum
Geopend 2-8°C: 2 maanden

Contacten en bestellingen

Aidian Belgium BV

info@aidian.be / +31 (0)317 35 18 38

Orders: cs@aidian.be

quikread.com

Product	Cat. nr.
QuikRead go easy CRP met QuikRead go Sample Collector 10µl	OD-153287
QuikRead go CRP Control Low	OD-153765
QuikRead go CRP Control	OD-153764
QuikRead go CRP Control High	OD-153763
QuikRead go Sample Collector 10µl	OD-153211
QuikRead go Instrument	OD-133893
QuikRead go Plus Instrument	OD-155378