




Acro 2019-nCoV IgG/IgM szybki test

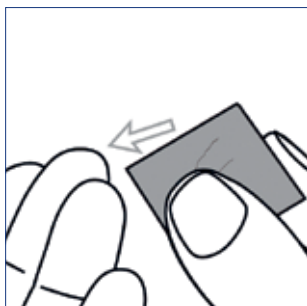


1 Pobierz próbkę z bocznej strony opuszka palca środkowego lub serdecznego. Do odkażenia końca palca użyj gazika nasączonego alkoholem.

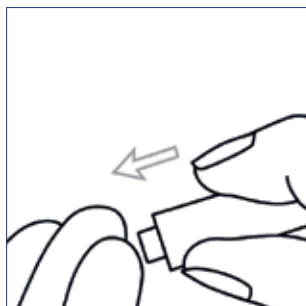


2 Delikatnie przyłóż lancet do palca i przekłuj skórę. Wyciśnij pierwszą kroplę krwi i zetrzyj ją.

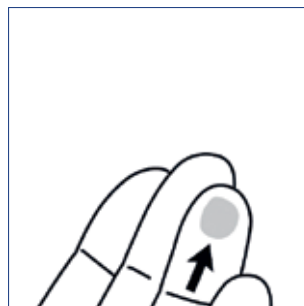


3 Aby zwiększyć krążenie krwi, delikatnie masuj palec, ale nie cały czas.

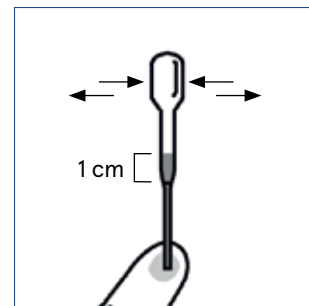


4 Trzymaj kroplomierz pionowo i odbierz krew min. 1 cm nad zwężoną częścią.

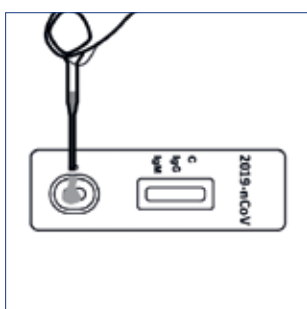

5 Wyjmij kasetę z torebki foliowej i połóż na czystą i płaską powierzchnię. Dodaj 1 pełną kroplę krwi (ok. 20µl) do otworu próbki (S).

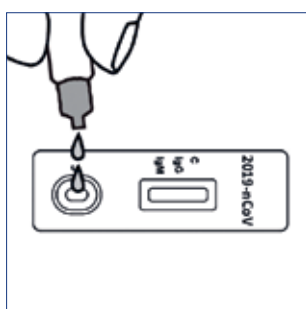


6 Dodaj 2 krople buforu (ok. 80 µl) i włącz czasomierz.

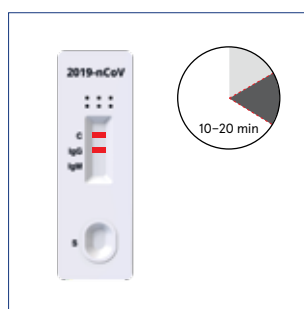

7 Po 10 minutach odczytaj wynik. Nie interpretuj wyniku po upływie 20 minut.


Przed wykonaniem testu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Acro 2019-nCoV IgG/IgM szybki test

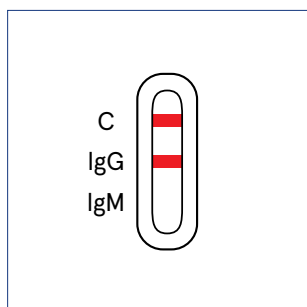


IgG wynik dodatni

Pojawią się dwa kolorowe prążki. Jeden kolorowy prążek pojawi się w strefie kontrolnej (C), a drugi w strefie IgG.

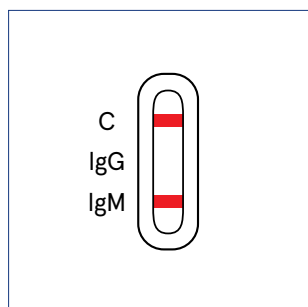


IgG wynik dodatni

Pojawią się dwa kolorowe prążki. Jeden kolorowy prążek pojawi się w strefie kontrolnej (C), drugi w strefie IgM.

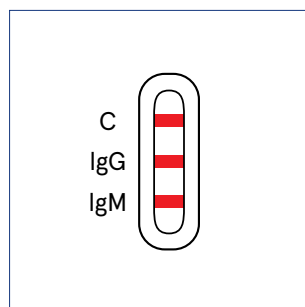


IgG oraz IgM wynik dodatni

Pojawią się trzy kolorowe prążki. Jeden kolorowy prążek pojawi się w strefie kontrolnej (C), jeden w strefie IgG i jeden w strefie IgM.

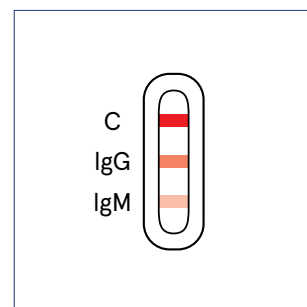


UWAGA: W zależności od stężenia przeciwciał przeciwko 2019-nCoV obecnych w próbce, intensywność koloru prążka wyników jest różna. Jakikolwiek odcień koloru testu należy interpretować jako wynik dodatni.

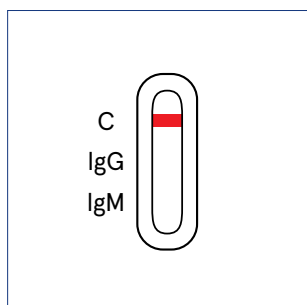

Wynik ujemny

Jeden kolorowy prążek pojawi się w strefie kontrolnej (C), a w strefie IgG lub IgM nie pojawi się żaden prążek.

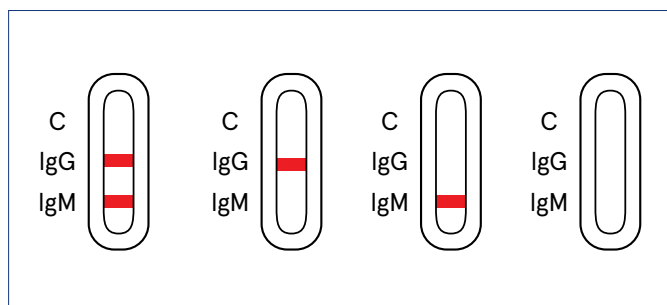

Nieważny wynik

W strefie kontrolnej (C) nie pojawi się żaden prążek. Sprawdź procedurę pracy i powtórz badanie z nowym testem. Jeśli problem wystąpi ponownie, nie używaj dłużej danego zestawu i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Aidian.

Do profesjonalnej diagnostyki *in vitro*.

Dane kontaktowe

Aidian Oy, Finlandia
Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK
Bělohorská 57, 169 00 Praga 6,
Republika Czeska

E-mail: info@aidian.pl

www.aidian.pl

Produkt

Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 testów

Numer katalogowy

INCP-402

Numer zamówienia

154601