




QuikRead go CRP+Hb

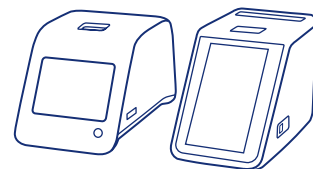


Pro QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

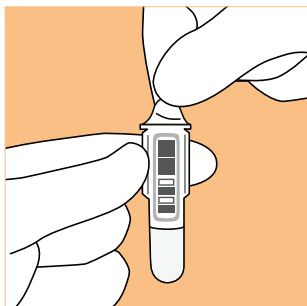


1 Odstraňte z kyvety krycí fólii. Nedotýkejte se rovných čistých ploch ve spodní části kyvety.

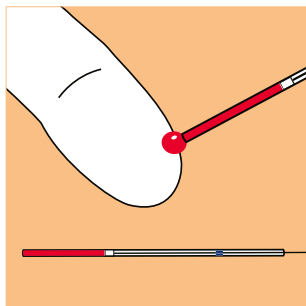


2 Odeberte pacientovi vzorek krve až po bílou zárázku (20 µl). Ujistěte se, že v kapiláře nejsou vzduchové bubliny. Zbytky vzorku z vnějšího povrchu kapiláry otřete.

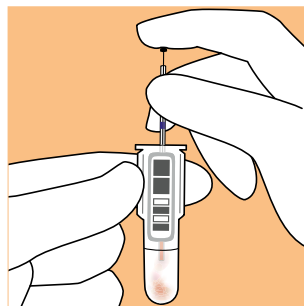


3 Vložte kapiláru se vzorkem krve (20 µl) do kyvety s puřem a stlaĉte píst. Přesvědĉte se, že kapilára je zcela prázdna.

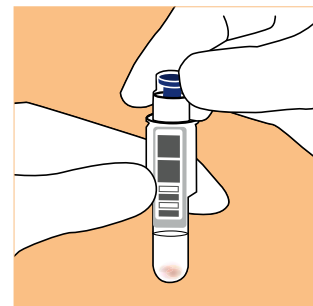


4 Kyvetu pevně uzavřete modrým víĉkem s re-agencií. Netlaĉte na vnitřní barevnou část víĉka. Test proved'te do 2 hodin.

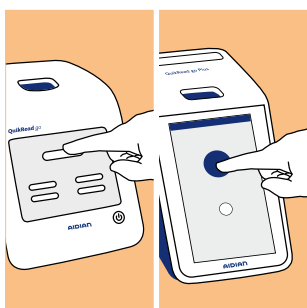

5 Na obrazovce přístroje QuikRead go zvolte tlačítko Měření / Měření vzorku.

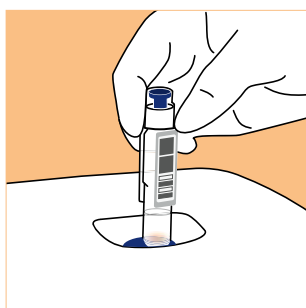


6 Vložte kyvetu do měřicí komůrky přístroje čárovým kódem směrem k sobě.

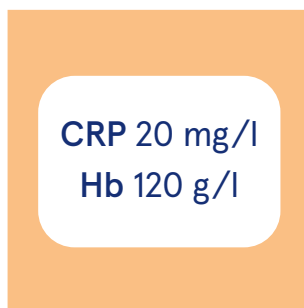

7 Doba měření jsou 2 minuty. Výsledek se na obrazovce objeví po dokončení měření, kyveta se automaticky vysune.

Před provedením testu si prosím přeĉt'te podrobnější informace v návodu k použití.

QuikRead go CRP+Hb

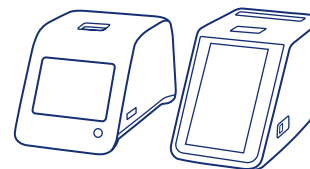

Souprava

Neotevřená souprava při teplotě 2–8°C: do data expirace soupravy



Tuba obsahující
víčka s reagensy

Skladování při teplotě 2–8°C: do data expirace soupravy
Skladování při teplotě 18–25°C: 1 měsíc (7,5 hodiny denně – 3 měsíce)



Kyvety

Neotevřená vnější ochranná fólie při teplotě 2–25°C:
do data expirace soupravy

Neotevřené kyvety po otevření vnější ochranné fólie:
při teplotě 2–8°C: 6 měsíců / při teplotě 18–25°C: 3 měsíce



Otevřená
kyveta

Před testováním kyvetu vytemperujte na teplotu 18–25°C
Test je nutné provést do 2 hodin od otevření kyvety
Vzorek je v pufru stabilní po dobu 2 hodin



Kontrolní
materiály CRP

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do data expirace
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: 2 měsíce



Kontrolní
materiál Hb

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do data expirace
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: 1 měsíc

Kontakt a objednávky

Aidian Oy, odštěpný závod CZ

info@aidian.cz / +420 233 350 533

quikread.cz

Produkt	Kat. č
QuikRead go CRP+Hb včetně kapilár a pístů	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead kapiláry (20 µl)	67962
QuikRead písty	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375