




QuikRead go HbA1c

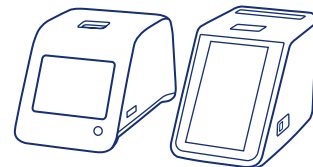


Pro QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

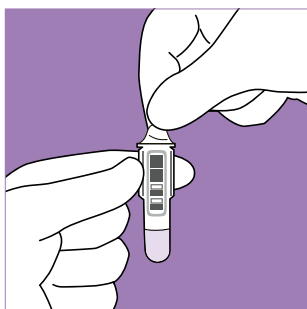


1 Odstraňte z kyvety krycí fólii. Nedotýkejte se rovných čistých ploch ve spodní části kyvety.

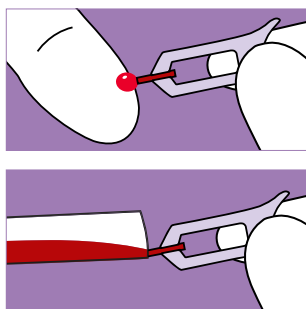


2 Držte QuikRead go Sample Collector 1µl téměř vodorovně pod povrchem vzorku. Zcela naplňte celou kapilární část odběrové pomůcky.

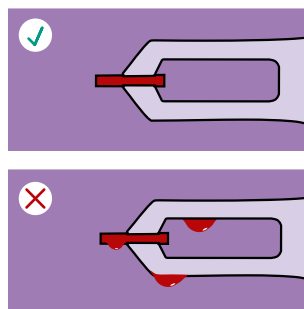


Poznámka! Zkontrolujte, zda je celá kapilára naplněna. Odběrovou pomůcku neotírejte! Pokud je na odběrové pomůcce přebytečný vzorek, odběrovou pomůcku vyhoďte.

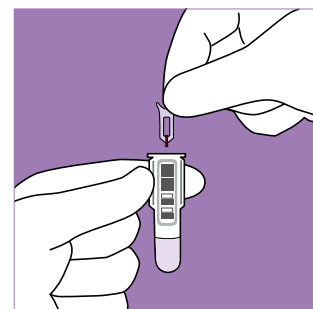


3 Do 1 minuty vložte odběrovou pomůcku do kyvety. Odběrová pomůcka se nedotýká roztoku v kyvetě.

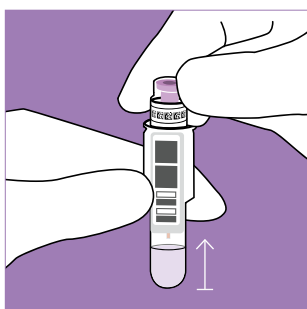

4 Kyvetu pevně uzavřete víčkem s reagentií pro HbA1c. Netlačte na vnitřní fialovou část víčka. Test provedte do 5 minut. Držte kyvetu ve svislé poloze a neprotřepávejte ji.

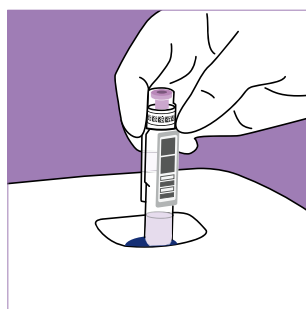


5 Na obrazovce přístroje QuikRead go zvolte tlačítko Měření / Měření vzorku. Vložte kyvetu do měřicí komůrky přístroje čárovým kódem směrem k sobě.

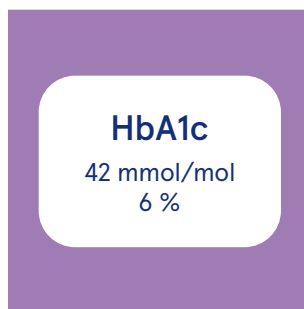

6 Doba měření je méně než 6 minut. Výsledek se na obrazovce objeví po dokončení měření, kyveta se automaticky vysune.

Před provedením testu si prosím přečtěte podrobnější informace v návodu k použití.

QuikRead go HbA1c

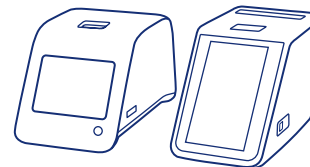

Souprava

Neotevřená souprava při teplotě 2-8°C: do data expirace soupravy
Neotevřená souprava při teplotě 18-25°C: 2 měsíce

Tuba obsahující
víčka s reagensy

Neotevřená tuba při teplotě 2-8°C: do data expirace soupravy
Po prvním otevření při teplotě 2-8°C: 6 měsíců / při teplotě 18-25°C:
2 měsíce



Kyvety

Neotevřená vnější ochranná fólie při teplotě 2-8°C: do data expirace
soupravy. Neotevřené kyvety po otevření vnější ochranné fólie:
při teplotě 2-8°C: 6 měsíců / při teplotě 18-25°C: 2 měsíce

Otevřená
kyveta

Před testováním kyvetu vytemperujte na teplotu 18-25°C
Test je nutné provést do 1 hodiny od otevření kyvety
Vzorek v kyvetě uzavřené víčkem je stabilní po dobu 5 minut

Odběrové
pomůcky

Skladování při teplotě 2-25°C: do data expirace uvedeného
na krabičce s odběrovými pomůckami Sample Collector 1µl

HbA1c Control
Set (kontrolní
materiál)

Neotevřená lahvička při teplotě 2-8°C: do data expirace
Otevřená lahvička při teplotě 2-8°C: 50 dní

Kontakt a objednávky

Aidian Oy, odštěpný závod CZ

info@aidian.cz / +420 233 350 533

quikread.cz

Produkt	Kat. č
QuikRead go HbA1c s QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testů	151058
QuikRead go HbA1c Control Set (kontrolní materiál)	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 ks	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375