




QuikRead go[®] wrCRP a wrCRP+Hb

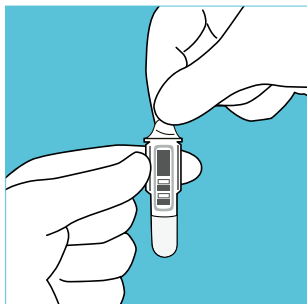


1 Odstraňte z kyvety krycí fólii. Nedotýkejte se rovných čistých ploch ve spodní části kyvety.

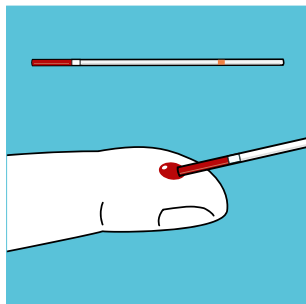

2 Do kapiláry s oranžovým proužkem odeberte pacientovi vzorek krve až po bílou zarážku (10 µl). Ujistěte se, že v kapiláře nejsou vzduchové bubliny. Zbytky vzorku z vnějšího povrchu kapiláry otřete.

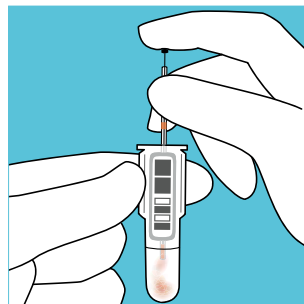


3 Vložte kapiláru se vzorkem krve (10 µl) do kyvety s puřem a stlačte píst. Přesvědčte se, že kapilára je zcela prázdná.

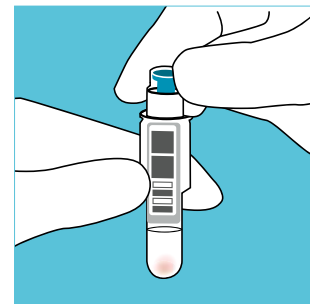

4 Kyvetu pevně uzavřete víčkem s reagentii pro wrCRP. Netlačte na vnitřní tyrkysovou část víčka. Test proveďte do 2 hodin.



5 Na displeji přístroje QuikRead go zvolte tlačítko **Měření**.

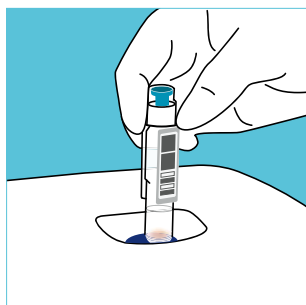

6 Vložte kyvetu do měřicí komůrky přístroje čárovým kódem směrem k sobě.



7 Výsledky se na obrazovce objeví po dokončení měření, kyveta se automaticky vysune z měřicí polohy. U testu QuikRead go wrCRP+Hb se výsledek Hb zobrazuje pod výsledkem CRP.

Před provedením testu si prosím přečtěte podrobnější informace v návodu k použití.

QuikRead go[®] wrCRP a wrCRP+Hb



Souprava

Neotevřená souprava při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#) soupravy.



Tuba obsahující
víčka s reagensy

Neotevřená tuba při 2–25°C: do [data expirace](#) soupravy.
Po prvním otevření při 2–25°C: **6 měsíců**.



Kyvety

Neotevřená vnější ochranná fólie při teplotě 2–25°C: do [data expirace](#) soupravy. Neotevřené kyvety po otevření vnější ochranné fólie: při teplotě 2–8°C: **6 měsíců** / při teplotě 18–25°C: **3 měsíce**.



Otevřená
kyveta

Před testováním kyvetu vytemperujte na teplotu 18–25°C.
Test je nutné provést do **2 hodin** od otevření kyvety.
Vzorek je v pufru stabilní po dobu **2 hodin**.



Kontrolní
materiály CRP

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#).
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: **2 měsíce**.



Kontrolní
materiál Hb

Neotevřená lahvička při teplotě 2–8°C: do [data expirace](#).
Otevřená lahvička při teplotě 2–8°C: **1 měsíc**.

Kontaktní informace

Aidian Oy, Finsko

Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel. +420 233 350 533

www.aidian.cz

www.quikread.cz

www.tackleamr.com

www.testcrp.cz

Produkt	Kat. č.
QuikRead go wrCRP včetně kapilár (10µl) a pístů	146521
QuikRead go wrCRP+Hb včetně kapilár (10µl) a pístů	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl Capillaries	147851
QuikRead Plungers	67966
Přístroj QuikRead go	135867