




Acro Strep A Cassette

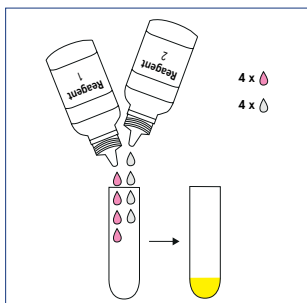


1 Tilsæt 4 fulde dråber rød reagens 1 til ekstraktions røret efterfulgt af 4 fulde dråber farveløst reagens 2. Bland opløsningen ved at svinge ekstraktions røret forsigtigt. Farven på opløsningen skifter til gul.

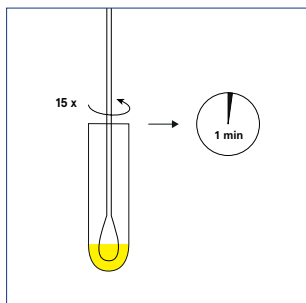

2 Anbring hals pødepinden i ekstraktionens røret. Bevæg hals pødepinden kraftigt rundt 15 gange og efterlad pinden i ekstraktionen røret i 1 minut.

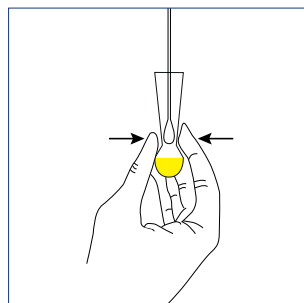


3 Pres hals pødepinden mod indersiden af røret og klem på røret mens hals pødepinden fjernes og det meste af væsken forbliver i røret. Kassér hals pødepinden.

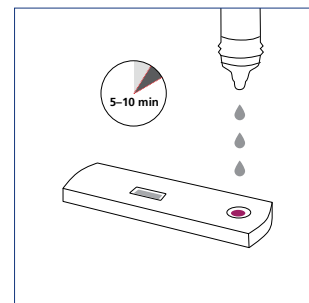


4 Placer testkassetten på en ren og plan overflade. Placer dråbehætten på ekstraktionsrøret og tilsæt tre dråber af eluaten til prøvebrønden. Start timeren. Aflæs resultatet efter 5 minutter. Resultatet kan ikke fortolkes efter henstand i 10 minutter.


Fortolkning af resultaterne

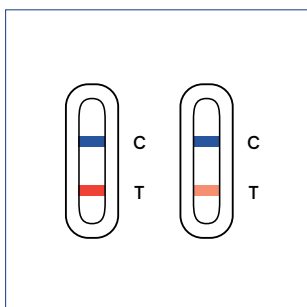

Positivt resultat
To linjer vises. En blå linje vises i kontrol linje region (C) og en rød linje vises i testlinje region (T).

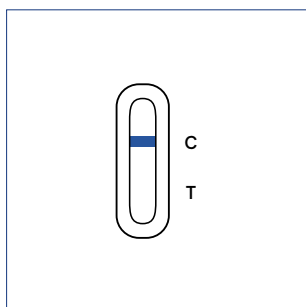

Negativt resultat
En blå linje vises i kontrollinje region (C). Ingen linje vises på testlinje region (T).

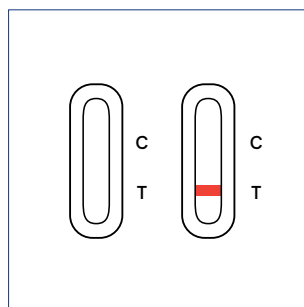

Ugyldigt resultat
Kontrollinje (C) fejler og udebliver. Gennemgå proceduren og gentag testen med en ny test. Hvis problemet fortsætter, afbryd brugen af testkittet og kontakt Aidian's repræsentant.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

Acro Strep A Cassette

Kun til professionel *in vitro*- diagnostisk brug

Prøveindsamling og håndtering

- Tag halspodningen med den sterile vatpind, der følger med i sættet. Transport pude pinde indeholdende modificerede Sturat's eller Amies-medium kan også bruges.
- Udfør testen umiddelbart efter prøveopsamling. Halspode prøven kan opbevares i en ren, tør beholder op til 8 timer ved stuetemperatur eller 72 timer ved 2-8 °C.

Hurtig test til påvisning af Strep A-antigen

- *Streptococcus pyogenes*, også kaldet Strep A eller GAS, er en betydelig årsag til faryngitis. Streptokokk faryngitis og er ofte vanskelig at skelne fra viral infektion¹, og en hurtig test er kost effektiv og en hurtig måde at påvise Strep A-infektioner nøjagtigt. Acro Strep A Cassette test er en kvalitativ lateral flow immunoassay test til påvisning af Strep A-antigener ved halspodning. Resultaterne er tilgængelig på mindre end 10 minutter.

Let at bruge

- Enkel testprocedure
- Klare farvereaktioner til let resultat tolkning

Pålidelig og hurtig

- Pålidelige resultater på mindre end 10 minutter
- Positive og negative kontroller inkluderet
- Intern kontrol sikrer korrekt testfunktion

Reference:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.



Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

www.aidian.dk

Produkt	Produkt nr.	Vare nr.
Acro Strep A Cassette, 20 tests	6404156	154585