



CRP kontrol


Lad kontrollen stabilisere i 30 minutter ved stuetemperatur før brug.

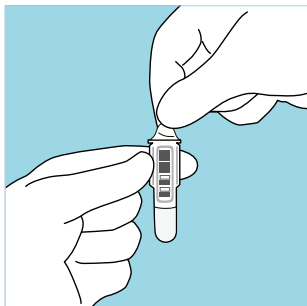



1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på kuvettens nederste del.

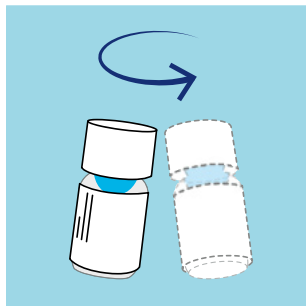


2 Vend kontrolhætteglasset forsigtigt rundt. Må ikke rystes, da det kan medføre skumdannelse! Hvis der dannes en hinde på væskeoverfladen, skal du vente, til den brister, eller forsigtigt fjerne den med et fnugfrit stykke papir. Hold flaskehalsen ren.

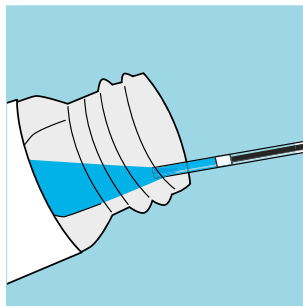


3 Vip kontrolhætteglasset let. Placer kapillærrøret lige under overfladen af kontrollen. Fyld det orange-stribede kapillærrør med prøven op til den hvide stopper. Kontrolløsningen er stabil i 5 minutter i kapillærrøret.

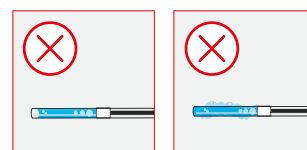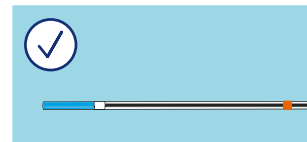


Bemærk! Placer ikke kapillærrøret helt i bunden af hætteglasset. Hvis der er luftbobler i kapillærrøret, skal det kasseres, og der skal tages en ny prøve. Tør eventuelle rester af prøven af på ydersiden af kapillærrøret.

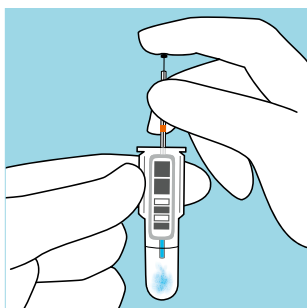


4 Placer prøven (10 µl) i bufferservæskeløsningen i kuvetten, og dispenser ved at trykke stemplet helt ned. Sørg for, at kapillærrøret er helt tørt.

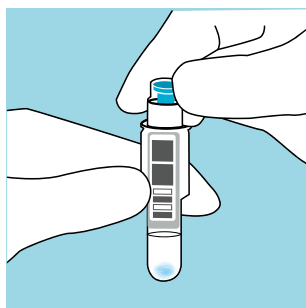

5 Luk kuvetten tæt med det turkise reagenslåg. Tryk ikke den farvede indvendige del af reagenshætten ned. Udfør testen inden for 15 minutter.

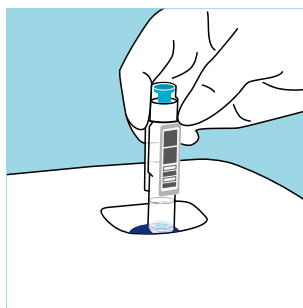

6 Vælg Kvalitetskontrol på skærmen på QuikRead go-instrumentet. Indsæt kuvetten i instrumentets målebrønd. Stregkoden skal vende mod dig.

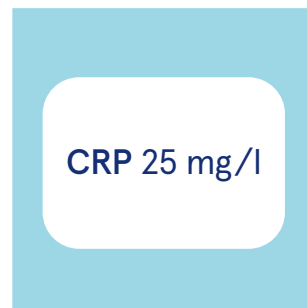

7 Måletiden er 2 minutter. Resultatet vises på skærmen, og kuvetten løftes automatisk op, når målingen er afsluttet. Kontrolprøvens acceptgrænser fremgår af mærkningen.

Opbevaring

Et åbnet hætteglas er holdbart i 2 måneder ved 2–8 °C.

Bemærk! Kassér ikke gummiproppen.

Undgå at bruge de sidste dråber af kontrolopløsningen.