



CRP kontrol

For QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument.



Lad kontrollen stabilisere i 30 minutter ved stuetemperatur før brug.

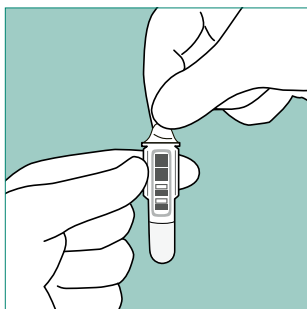



1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på kuvettens nederste del.

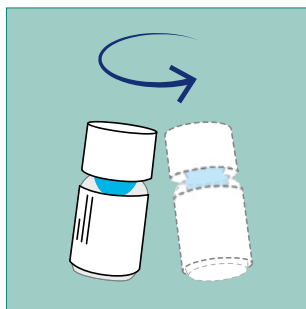


2 Vend kontrolhætteglasset forsigtigt rundt. Må ikke rystes, da det kan medføre skumdannelse! Hvis der dannes en hinde på væskeoverfladen, skal du vente, til den brister, eller forsigtigt fjerne den med et hjørne af et fnugfrit stykke papir. Hold flaskehalsen ren.

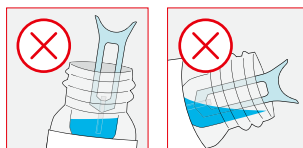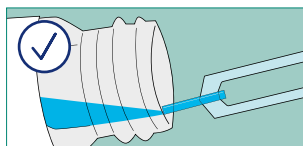


3 Vip kontrolhætteglasset, så kontrolopløsningen når op i flaskehalsen. Hold prøveopsamleren næsten vandret lige under væskeoverfladen ved hætteglassets åbning. Fyld prøveopsamlerens kapillærdel helt.

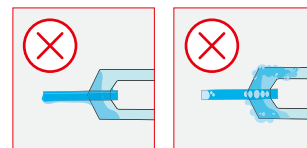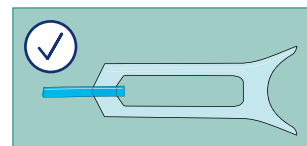


Bemærk! Anbring ikke prøveopsamleren i skummet eller inde i kontrolhætteglasset. Hvis der er overskydende prøve eller luftbobler på prøveopsamleren, skal den kasseres, og der skal udtages en ny prøve. Aftør ikke prøveopsamleren.

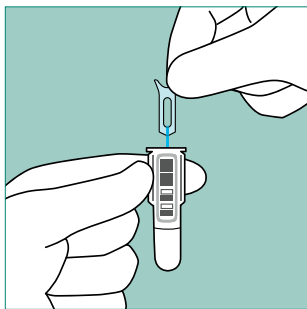


4 Indsæt prøveopsamleren i kuvetten inden for 2 minutter.

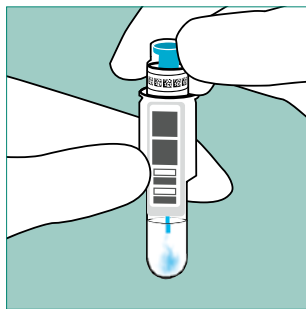

5 Luk kuvetten tæt med easy CRP-reagenshætten. Tryk ikke den farvede indvendige del af reagenshætten ned. Udfør testen inden for 15 minutter.

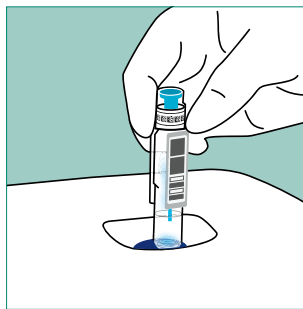

6 Vælg Kvalitetskontrol på skærmen på QuikRead go-instrumentet. Indsæt kuvetten i instrumentets målebånd. Stregkoden skal vende mod dig.

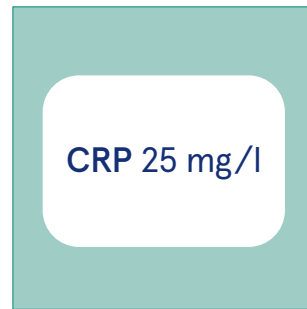

7 Måletiden er 2 minutter. Resultatet vises på skærmen, og kuvetten løftes automatisk op, når målingen er afsluttet. Kontrolprøvens acceptgrænser fremgår af mærkningen.

Opbevaring

Et åbnet hætteglas er holdbart i 2 måneder ved 2–8 °C.

Bemærk! Kassér ikke gummipropfen.

Undgå at bruge de sidste dråber af kontrolopløsningen.