




# Acro 2019-nCoV IgG/IgM -pikatesti

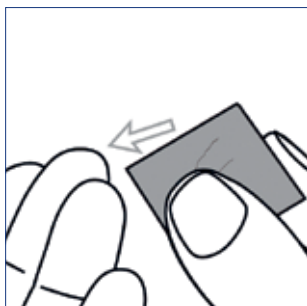


**1** Ota näyte keskisormen tai nimettömän sivusta. Puhdista näytteenottosormi alkoholilla kosteutetulla puhdistuslapulla.

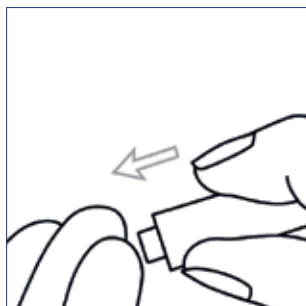


**2** Aseta lansetti tiukasti ihoa vasten ja pistä sormeen reikä. Purista ja pyyhi ensimmäinen veripisara pois.

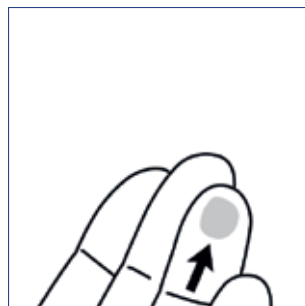


**3** Lisätäksesi verentuloa purista näytteenottosormea lujasti, mutta ei yhtäjaksoisesti.

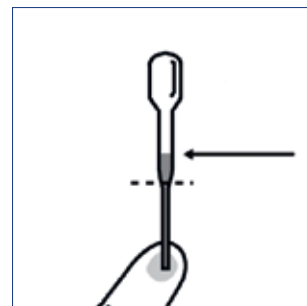


**4** Pidä pipettiä pystysuorassa ja täytä 1 cm yli merkkiviivan.

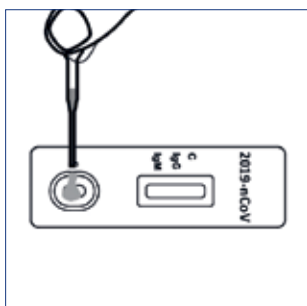

**5** Poista testikasetti foliopussista ja aseta se puhtaalle ja tasaiselle pinnalle. Tiputa yksi tippa verta (noin 20 µl) näytekuppaan (S).

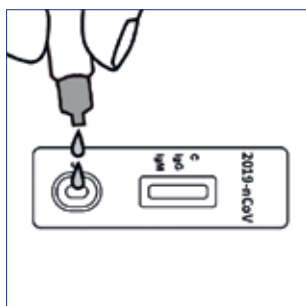


**6** Lisää 2 tippaa puskuriliuosta (noin. 80 µl) ja käynnistä ajanotto.

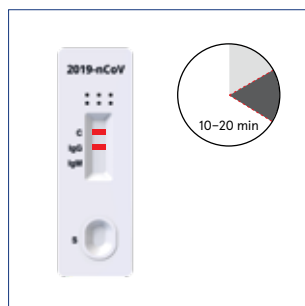

**7** Lue tulokset 10 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee tulkita viimeistään 20 minuutin kuluttua. Hävitä testi paikallisten määräysten mukaisesti.


Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# Acro 2019-nCoV IgG/IgM -pikatesti

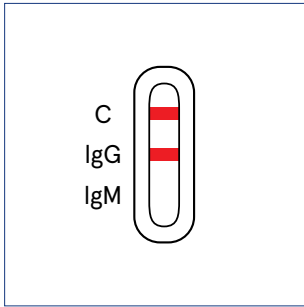


### IgG positiivinen tulos

Kaksi värillistä viivaa tulee näkyviin. Yksi värillinen viiva näkyy kontrollialueella (C) ja toinen IgG-testialueella.

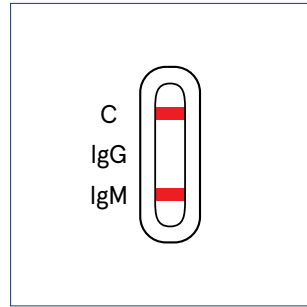


### IgM positiivinen tulos

Kaksi värillistä viivaa tulee näkyviin. Yksi värillinen viiva näkyy kontrollialueella (C) ja toinen IgM-testialueella.

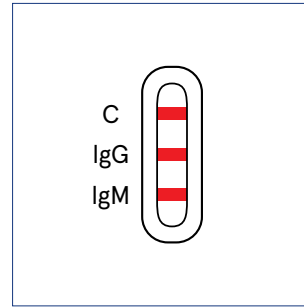


### IgG ja IgM positiivinen tulos

Kolme värillistä viivaa tulee näkyviin. Yksi värillinen viiva näkyy kontrollialueella (C), toinen IgG-testialueella ja kolmas viiva IgM-testialueella.

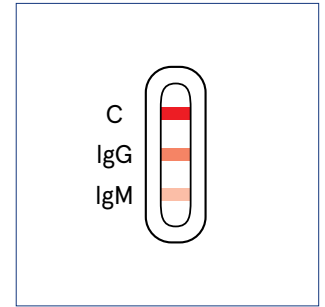


**HUOM:** Testiviivan värin voimakkuus voi vaihdella riippuen näytteessä olevien 2019-nCoV-vasta-aineiden määrästä. Mitä tahansa testissä ilmenevää värisävyä on pidettävä positiivisena.

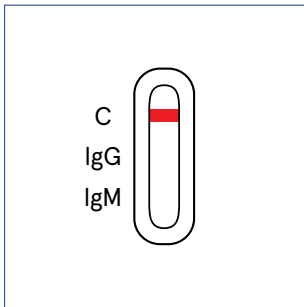

### Negatiivinen tulos

Yksi värillinen viiva näkyy kontrollialueella (C). IgG- tai IgM-testialueilla ei näy viivaa.

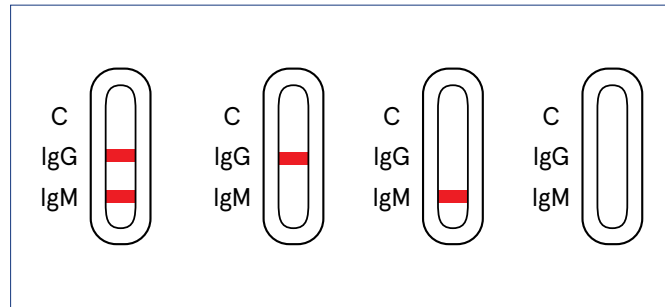

### Virheellinen tulos

Kontrolliviiva (C) ei tule näkyviin. Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma ei poistu, lopeta testipakkauksen käyttö ja ota yhteyttä Aidianin edustajaan.

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

tai puh. 050 381 5198

www.aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno.
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 testiä	INCP-402	154601