




Alltest Strep A kasetti

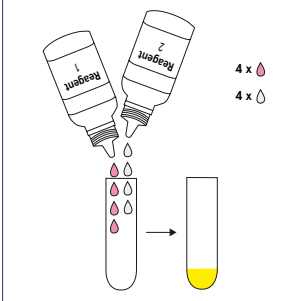


1 Lisää 4 tippaa reagenssia 1 uuttoputkeen. Reagenssi 1 on väriltään punaista. Lisää 4 tippaa reagenssia 2 uuttoputkeen. Sekoita liuos pyörittämällä varovasti uuttoputkea. Liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.

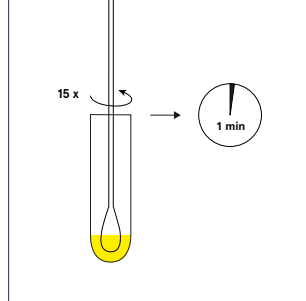

2 Laita näytteenottotikku uuttoputkeen. Sekoita liuosta näytteenottotikulla pyörittämällä sitä vähintään 15 kertaa. Jätä tikku uuttoputkeen vähintään 1 minuutiksi.

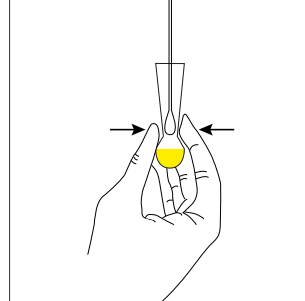


3 Purista neste pois näytteenottotikusta pyörittämällä tikkua putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla, kun vedät näytteenottotikun pois putkesta. Hävitä tikku.

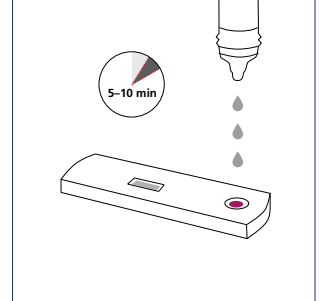


4 Aseta testikasetti tasaiselle pinnalle. Laita uuttoputkeen tippakärki ja tiputa uuttoputkesta 3 tippaa liuosta näytekuppaan. Käynnistä ajastin. Lue tulokset 5 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee tulkita 10 minuutin kuluessa.

Tulosten tulkinta

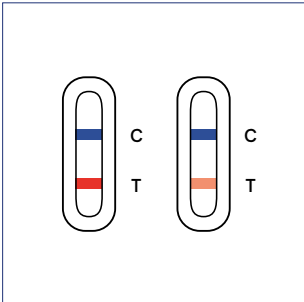


Positiivinen tulos

Kaksi selvästi erottuvaa viivaa tulee näkyviin. Sininen viiva näkyy kontrollialueella (C) ja punainen viiva testialueella (T).

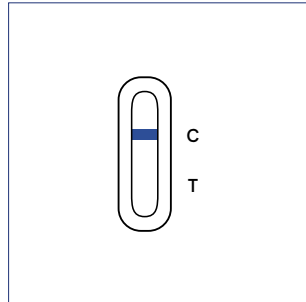

Negatiivinen tulos

Sininen viiva näkyy kontrollialueella (C). Testin (T) viiva-alueella ei näy viivaa.

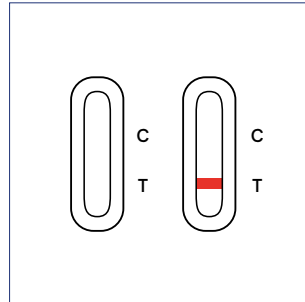

Virheellinen tulos

Kontrolliviiva (C) ei tule näkyviin. Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma toistuu, lopeta testipakkauksen käyttö ja ota yhteyttä Aidianin edustajaan.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

Alltest Strep A kasetti

Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten *in vitro* diagnostiikka -käyttöön.

Näytteenotto ja näytteen käsittely

- Ota nielunäyte pakkaukseen sisältyvällä steriilillä vanutikulla.
- Testaus tulee suorittaa välittömästi näytteenoton jälkeen. Nielunäytteitä voidaan säilyttää puhtaassa, kuivassa muoviputkessa korkeintaan kahdeksan tuntia huoneenlämmössä tai 72 tuntia 2–8°C lämpötilassa.
- Myös näytteenottimia, jotka ovat Stuart tai Amies -kuljetuselatusaineessa voidaan käyttää testaukseen.

Pikatesti streptokokki A -antigeenin tunnistamiseen nielunäytteestä

Streptococcus pyogenes, jota kutsutaan myös Strep A:ksi tai GAS:ksi, on merkittävä nielutulehduksen aiheuttaja. Streptokokkien aiheuttamia on usein vaikea erottaa virusinfektiosta, ja pikatestit tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan tavan Strep A -infektioiden täsmälliseen havaitsemiseen. Alltest Strep A kasettitesti on kvalitatiivinen lateraaliseen virtaukseen perustuva immunologinen testi Strep A -antigeenin mittaamiseksi nielunäytteestä. Tulokset ovat saatavilla alle 10 minuutissa.

Helppokäyttöinen

- Helppo testimenettely
- Selkeät värireaktiot tulosten tulkinnan helpottamiseksi

Luotettava ja nopea

- Luotettavat tulokset alle 10 minuutissa
- Sisältää positiivisen ja negatiivisen kontrollin
- Sisäinen kontrolli varmistaa, että testi toimii oikein

Viite:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? *Canadian Family Physician* 2018; 64, 832–840.



Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

tai puh. 050 381 5198

aidian.fi

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero
Alltest Strep A Cassette, 20 tests	ISTB-502	155073