




Alltest Strep A tikkutesti

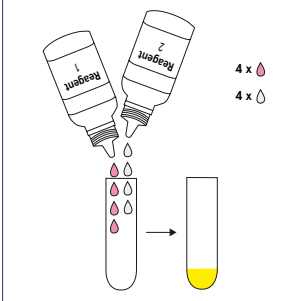


1 Lisää neljä tippaa reagenssia 1 uuttoputkeen. Reagenssi 1 on väriltään punaista. Lisää neljä tippaa reagenssia 2 uuttoputkeen. Sekoita liuos pyörittämällä varovasti uuttoputkea. Liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.

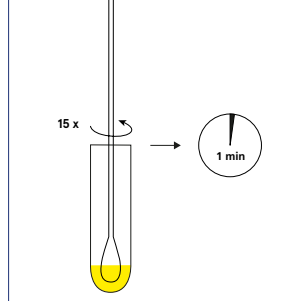

2 Ota nielunäyte pakkaukseen sisältyvällä näytteenottotikulla ja laita se uuttoputkeen. Pyöritä tikkua 15 kertaa putken pohjaa vasten voimakkaasti sekoittaen ja jätä tikku uuttoputkeen yhdeksi (1) minuutiksi.

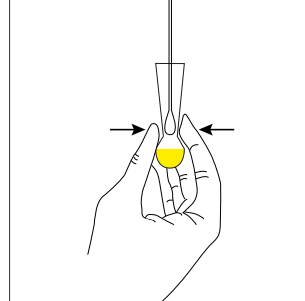


3 Purista neste pois näytteenottotikusta pyörittämällä tikkua putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla, kun vedät näytteenottotikun pois putkesta. Hävitä tikku.

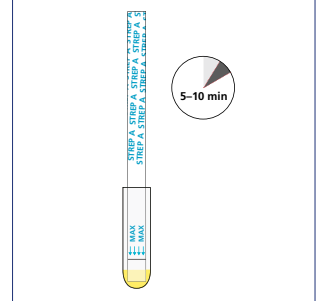


4 Laita testiliuska uuttoputkeen siten, että liuskan nuolet osoittavat alaspäin, ja käynnistä ajastin. Lue tulokset 5 minuutin kuluttua. Testin tulos tulee tulkita 10 minuutin kuluessa.


Tulosten tulkinta

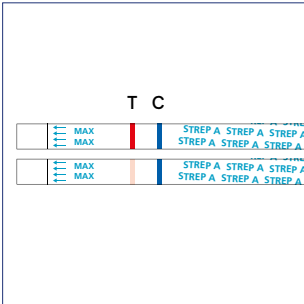

Positiivinen tulos
Kaksi selvästi erottuvaa viivaa tulee näkyviin. Sininen viiva näkyy kontrollialueella (C) ja punainen viiva testialueella (T).

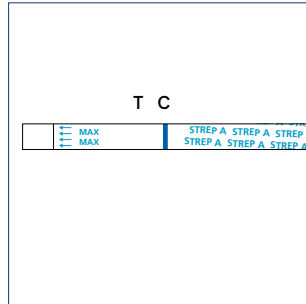

Negatiivinen tulos
Yksi sininen viiva näkyy kontrollialueella (C). Testin (T) viiva-alueella ei näy viivaa.

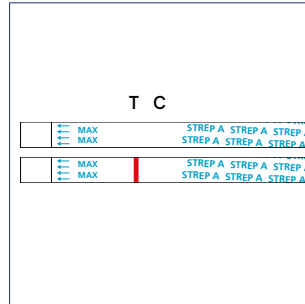

Virheellinen tulos
Kontrolliviiva (C) ei tule näkyviin. Tarkista testimenetelmä ja toista testi. Jos ongelma toistuu, lopeta testipakkauksen käyttö ja ota yhteyttä Aidianin edustajaan.

Tutustu
käyttöohjeisiin
ennen testin
suorittamista.

Alltest Strep A tikkutesti

Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten *in vitro* diagnostiikka -käyttöön.

Näytteenotto ja näytteen käsittely

- Ota nielunäyte pakkaukseen sisältyvällä steriilillä vanutikulla.
- Testaus tulee suorittaa välittömästi näytteenoton jälkeen. Nielunäytteitä voidaan säilyttää puhtaassa, kuivassa muoviputkessa korkeintaan kahdeksan tuntia huoneenlämmössä tai 72 tuntia 2–8°C:n lämpötilassa.
- Myös näytteenottimia, jotka ovat Stuart tai Amies -kuljetuselatusaineessa voidaan käyttää testaukseen.

Pikatesti streptokokki A -antigeenin tunnistamiseen nielunäytteestä

Streptococcus pyogenes, jota kutsutaan myös Strep A:ksi tai GAS:ksi, on merkittävä nielutulehduksen aiheuttaja. Streptokokkien aiheuttamia nielutulehduksia on usein vaikea erottaa virusinfektiosta, ja pikatestit tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan tavan Strep A -infektioiden täsmälliseen havaitsemiseen. Alltest Strep A tikkutesti on kvalitatiivinen lateraaliseen virtaukseen perustuva immunologinen testi Strep A -antigeenin mittaamiseksi nielunäytteestä. Tulokset ovat saatavilla alle 10 minuutissa.

Helppokäyttöinen

- Helppo testimenettely
- Selkeät värireaktiot tulosten tulkinnan helpottamiseksi

Luotettava ja nopea

- Luotettavat tulokset alle 10 minuutissa
- Sisältää positiivisen ja negatiivisen kontrollin
- Sisäinen kontrolli varmistaa, että testi toimii oikein

Viite:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? *Canadian Family Physician* 2018; 64, 832–840.



Yhteystiedot ja tilaukset

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684

tilaukset@aidian.fi

| Tuote | Tuotenumero | Tilausnumero |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Alltest Strep A Dipstick, 25 testiä | ISTB-501 | 155072 |