




# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c

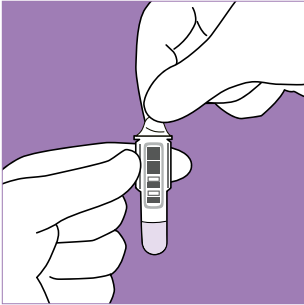


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

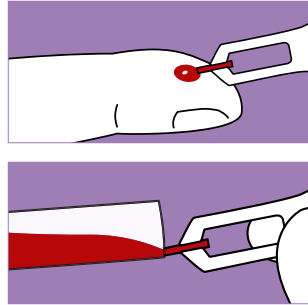


**2** Pidä QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaari-osa kokonaan.

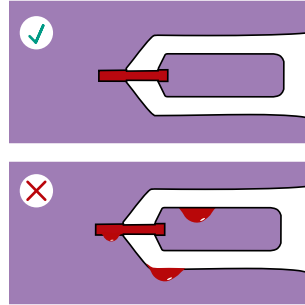


**Huom!** Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. **Älä pyyhi näytteenotinta!** Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

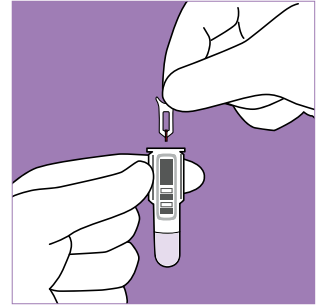

**3** Laita näytteenotin kyvetiin 1 minuutin kuluessa näytteenotosta. Näytteenotin ei koske kyvetissä oleva nestettä.

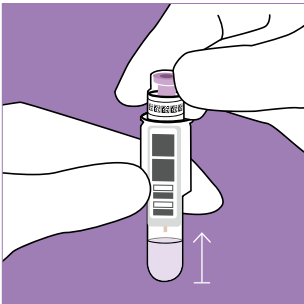

**4** Sulje kyvetti huolellisesti HbA1c-reagenssikorkilla. Älä paina korkin liilaa sisäosaa alas. Tee testi 5 minuutin sisällä. **Pidä kyvetti pystysuorassa äläkä ravista.**

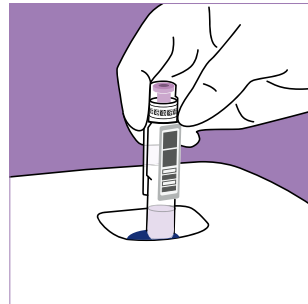

**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä **Mittaus**. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



**6** Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c



Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8 °C:n lämpötilassa:  
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.  
Avaamaton pakkaus 18–25 °C:n lämpötilassa: **2 kuukautta**.



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka**. Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen: säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **2 kuukautta**.



Avattu  
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin suorittamista. Testi tulee tehdä **1 tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta. Näyte säilyy korkilla suljetussa kyvetissä **5 minuutin** ajan.



Reagenssi-  
korkit

Avaamaton putkilo 2–8 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka. Avaamisen jälkeen 2–8 °C: **6 kuukautta** / 18–25 °C: **2 kuukautta**.



Näytteen-  
ottimet

Säilytys 2–25 °C: QuikRead go Sample Collector 1µl -pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.



HbA1c-  
kontrollit

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka.  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **50 päivää**.

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684

quikread.com

## Tilaukset

Mediq Suomi Oy

asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro.	Tilausno. Mediq Suomi
QuikRead go HbA1c, 25 testiä sis. QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenottimet	151058	10003596
QuikRead go HbA1c Control Set	154520	40016382
QuikRead go -laite	135867	-
QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenottimet	154457	10003317