




# QuikRead go HbA1c

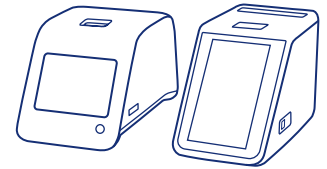


## QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

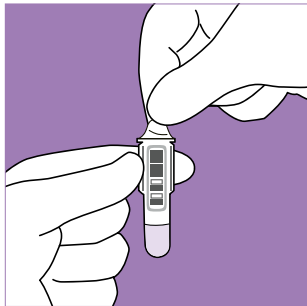


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

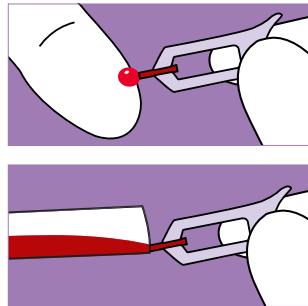


**2** Pidä QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaariosa kokonaan.

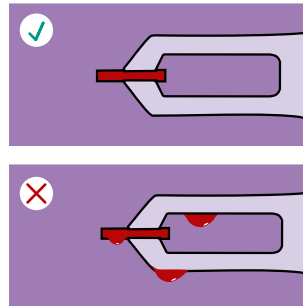


**Huom!** Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. Älä pyyhi näytteenotinta! Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

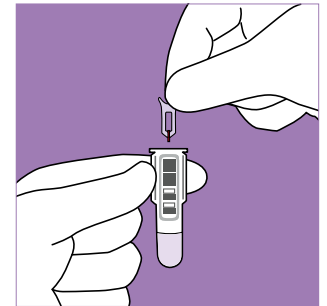


**3** Laita näytteenotin kyvetiin 1 minuutin kuluessa näytteenotosta. Näytteenotin ei koske kyvetissä oleva nestettä.

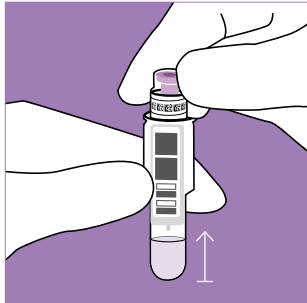


**4** Sulje kyveti huolellisesti HbA1c-reagenssikorkilla. Älä paina korkin liilaa sisäosaa alas. Tee testi 5 minuutin sisällä. Pidä kyveti pystysuorassa äläkä ravista.

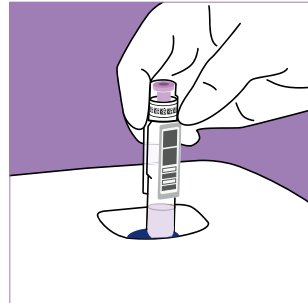

**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus. Laita kyveti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

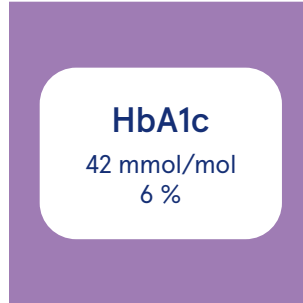


**6** Mittausaika on alle 6 minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyveti nousee automaattisesti ylös mitauskammiosta.

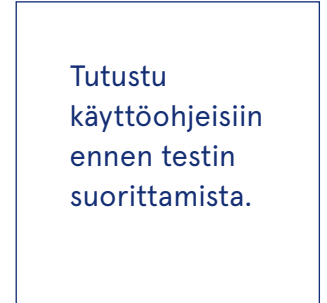

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go HbA1c

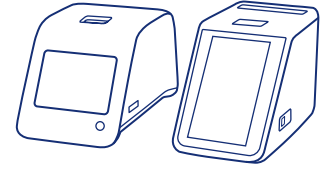

Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8°C: pakkauksen viimeiseen käyttö-  
päivämäärään saakka  
Avaamaton pakkaus 18–25°C: 2 kuukautta



Reagenssi-  
korkit

Avaamaton putkilo 2–8°C: pakkauksen viimeiseen käyttö-  
päivämäärään saakka  
Avaamisen jälkeen 2–8°C: 6 kuukautta / 18–25°C: 2 kuukautta



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–8°C: pakkauksen viimeiseen käyttö-  
päivämäärään saakka  
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:  
säilytys 2–8°C: 6 kuukautta / säilytys 18–25°C: 2 kuukautta



Avattu kyveti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi (18–25°C) ennen  
testin suorittamista. Testi tulee suorittaa 1 tunnin kuluessa kyvetin  
avaamisesta. Näyte säilyy korkilla suljetussa kyvetissä 5 minuutin ajan.



Näytteen-  
ottimet

Säilytys 2–25°C: Sample Collector 1µl -pakkauksen viimeiseen  
käyttöpäivämäärään saakka



HbA1c  
-kontrollit

Avaamaton pullo 2–8°C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka  
Avattu pullo 2–8°C: enintään 50 päivää

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684  
tilaukset@aidian.fi / quikread.com

## Tilaukset

Mediq Suomi Oy  
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero, Mediq Suomi
QuikRead go HbA1c sisältäen QuikRead go Sample Collector 1µl -näytteenottimet, 25 testiä	151058	100003596
QuikRead go HbA1c Control Set	154520	40016382
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 kpl	154457	10003317
QuikRead go Instrument	135867	-
QuikRead go Plus Instrument	155375	-