




QuikRead go Strep A

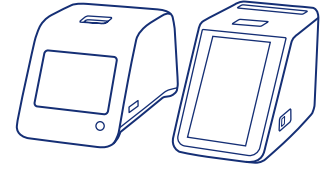



QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

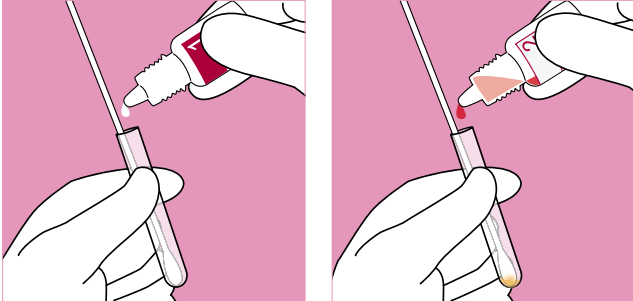


1 Ota nielunäyte pakkaukselle tarkoitetulla näytteenottotikulla. Laita näytteenottotikku uuttoputkeen ja lisää kaksi (2) tippaa väritöntä uuttoliuosta nro 1 ja kaksi (2) tippaa punaista uuttoliuosta nro 2. Liuoksen väri uuttoputkessa muuttuu keltaoranssiksi.

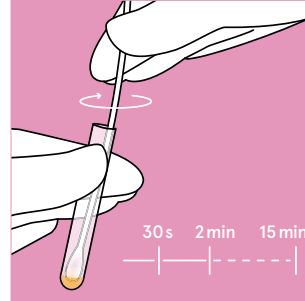



2 Pyöritä näytteenottotikkua liuoksessa vähintään 30 s. Jätä tikku uuttoputkeen vielä 90 s. ajaksi. Tikku saa seistä uuttoputkessa enintään 15 minuuttia. Poista esitätetyn kyvetin suojafolio. Vältä koskemista kyvetin alaosaan.

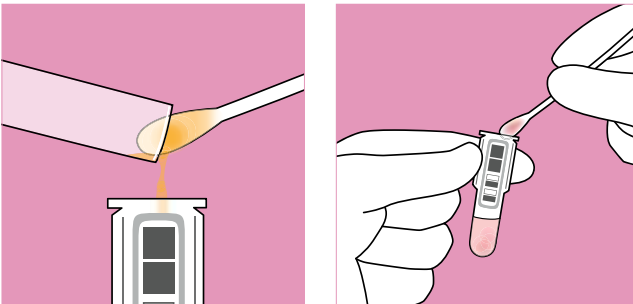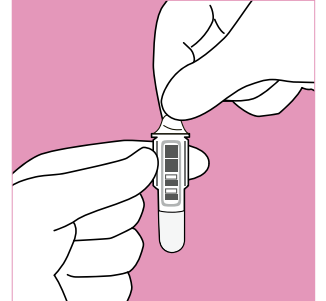

3 Siirrä uuttoputkessa oleva näyte näytteenottotikun avulla kyvetiin kallistamalla uuttoputkea. Jos uuttoputkeen jää liuosta, kaada se kyvetiin. Laita näytteenottotikku kyvetiin ja pyöritä tikkua voimakkaasti. Liuoksen väri muuttuu punaiseksi. Poista neste tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ja nosta tikku kyvetistä.

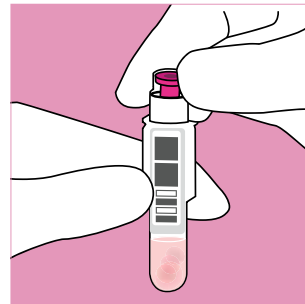


4 Sulje kyveti huolellisesti Strep A -reagenssikorkilla. Älä paina korkin sisäosaa alas. Näyte säilyy puskurissa 4 tunnin ajan. Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus.

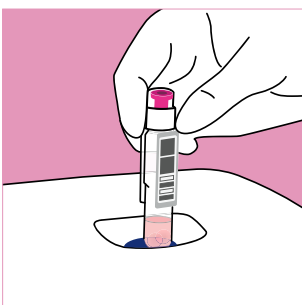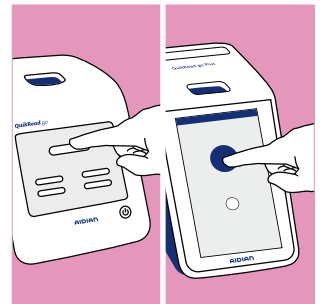

5 Laita kyveti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittausaika on alle 4 minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyveti nousee automaattisesti ylös mittauskammioista.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go Strep A

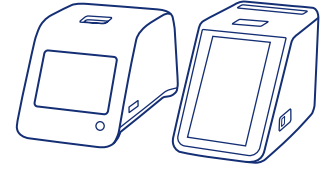

Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton reagenssipakkaus 2–25 °C:
reagenssipakkauksen vanhenemispäivämäärään saakka



Reagenssikorkit,
uuttoreagenssit
ja kontrollit

Avaamattomina säilytys 2–25 °C: vanhenemispäivämäärään saakka
Avattuina säilytys 2–25 °C: 12 kuukautta



Kyvetit

Avaamattomat pakkaukset säilytys 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka. Foliopussin avaamisen jälkeen: Säilytys
2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta.




Avattu kyvetti


Anna puskurin lämmentä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.
Avattu kyvetti tulee käyttää 2 tunnin kuluessa.

Näytteenotto


Varmista, että näyte siirtyy kokonaan testiliuokseen. Näytteenottotikun pyörittäminen sekä uuttovaiheessa että siirrettäessä näytettä kyvettiin on tärkeää. Muista poistaa näyte tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ennen tikun poistamista kyvetistä.

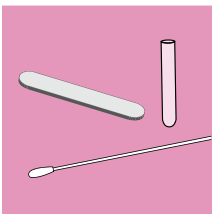


1 Tarvitset seuraavat tarvikkeet näytteen ottamiseksi QuikRead go Strep A testausta varten: HydraFlock-näytteenottotikku, kielilasta, QuikRead go Strep A -uuttoputki. Käytä ainoastaan Strep A -pakkaukselle tarkoitettuja HydraFlock-näytteenottotikkuja. Muiden näytteenottotikkujen käyttö saattaa johtaa väärään tulokseen.

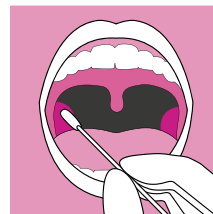

3 Kerää nielunäyte näytteenottotikulla. Pyöritä tikkuu näytteenoton aikana edustavan näytteen varmistamiseksi. Muista ottaa näyte nielurisojen molemmilta puolilta. Vältä näytteenottoa muilta alueilta välttääksesi väärä negatiivinen tulos. Liian suuret määrät sylkeä tai limaa voivat häiritä testin suoritusta.

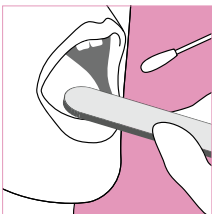

2 Poista HydraFlock-näytteenottotikku pakkauksesta. Pyydä potilasta avaamaan suunsa. Paina potilaan kieltä alas kielilastalla.

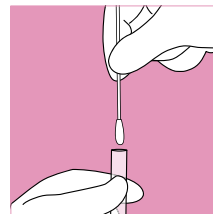

4 Kontaminaation välttämiseksi varmista, ettei näytteenottotikku kosketa suun muita pintoja, esimerkiksi poskia tai kieltä. Laita tikku uuttoputkeen.

Varmista uuttovaiheen onnistuminen. Tarkkaile testiliuoksen värimuutoksia. Väri ilmaisee liuoksen oikean pH-arvon eri työvaiheissa. Noudata ohjeessa annettuja aikarajoja.

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi / +358 50 380 9684
quikread.com

Tilaukset: Mediq Suomi Oy
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go Strep A -reagenssipakkaus, 50 testiä	135883	20008848
QuikRead go Instrument	135867	-
QuikRead go Plus Instrument	155375	-