




QuikRead go CRP+Hb

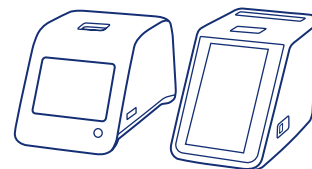


QuikRead go Instrument és QuikRead go Plus Instrument készülékhez

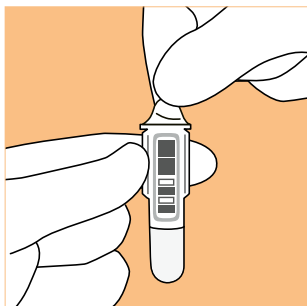


1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. A folyadék felszínének a küvettán jelölt két vonal között kell lennie. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.

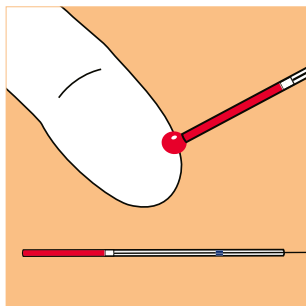


2 Állítsa össze a kapillárist, vegyen le a betegtől 20 µl vért (a fehér dugóig töltsen). Győződjön meg arról, hogy nincs légbuborék a kapillárisban. Törölje le a felesleges mintát a kapilláris külső felületéről.

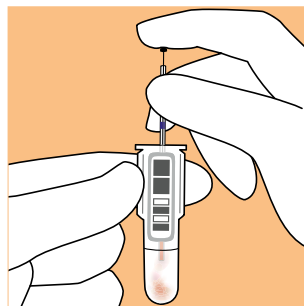


3 Helyezze a mintát (20 µl) tartalmazó kapillárist a küvettába és a dugattyú segítségével adja hozzá a mintát a küvettában lévő pufferoldathoz. Győződjön meg arról, hogy a kapilláris teljesen kiürült.

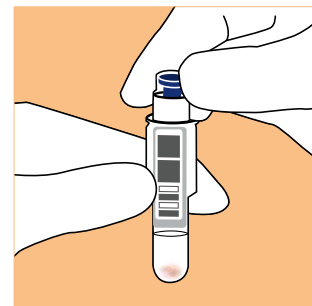


4 Zárja le a küvetta szorosán a kék reagens kupakkal. Ne nyomja le a reagens kupak színes belső részét. Két órán belül el kell végezni a mérést.

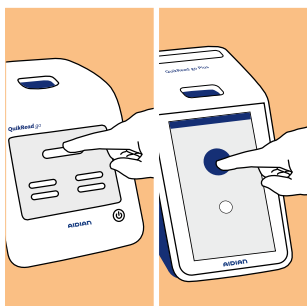

5 Válassza a Mérés / Minta mérése lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén.

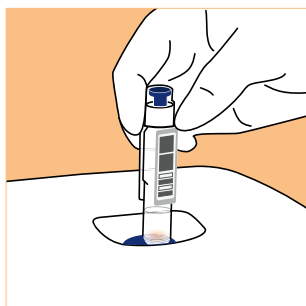


6 Helyezze a küvetta a készülék mérőrekeszébe. A vonalkódnak Ön felé kell tekintenie. A készülék felismeri a minta típusát. A mérés folyamata figyelemmel kísérhető a kijelzőn.

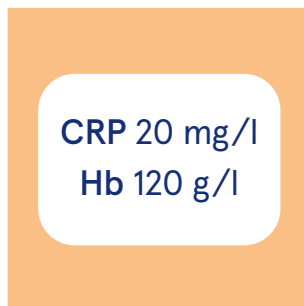

7 A mérési idő 2 perc. Az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kilemelkedik amikor a mérés befejeződött.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

QuikRead go CRP+Hb

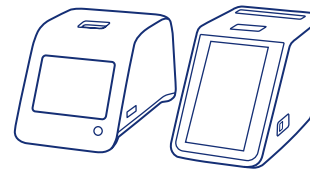

Készlet

Bontatlan készlet tárolása 2–8°C-on: a készlet lejárati idejéig



Reagenskupakok
tartályban

Bontatlan tartály tárolása 2–8°C-on: a készlet lejárati idejéig
Tárolás 18–25°C-on: 1 hónapig (3 hónap ha 7.5óra/nap)



Küveták

Bontatlan fóliatasak 2–25°C-on: a készlet lejárati idejéig

Bontatlan küveták a fóliatasak felnyitása után:
2–8°C-on: 6 hónap / 18–25°C-on: 3 hónap



Felnyitott
küvetta

A teszt elvégzése előtt hagyja a puffert 18–25°C-ra felmelegedni
A küvetta felnyitásától számított 2 órán belül végezze el a tesztet
A minta a pufferban 2 órán át stabil



CRP
kontrollanyagok

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a lejárati idejéig
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: 2 hónapig



Hb
kontrollanyag

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a lejárati idejéig
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: 1 hónapig

Kapcsolatfelvétel és rendelés

Aidian Oy, odštěpný závod CZ.
Képviselő CZ, HU &
Délkelet Európa fiókroda

info@aidian.hu / +36 205 019 012
quikread.hu

Termék	Kat. szám
QuikRead go CRP+Hb kapillárisokkal és dugattyúkkal	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead Capillaries (20 µl)	67962
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375