




QuikRead go HbA1c

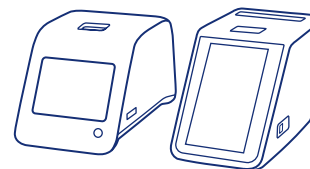


QuikRead go Instrument és QuikRead go Plus Instrument készülékhez

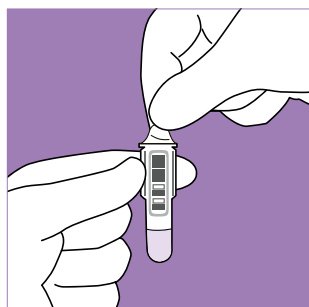


1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.

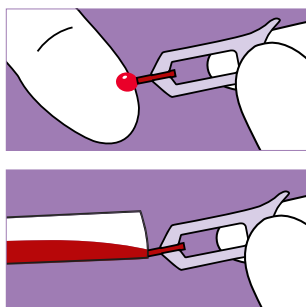


2 Tartsa a QuikRead go Sample Collector 1 µl mintagyűjtőt szinte vízszintesen, éppen csak a minta felszíne alá. Töltse fel teljesen a mintagyűjtő kapilláris eszközt.

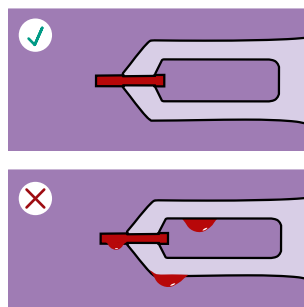


Fontos! Ellenőrizze, hogy a kapilláris rész teljesen feltöltődött-e. Ne törölje le a mintagyűjtő eszközt! Ha többlet minta van a mintagyűjtő eszközön, dobja ki a mintagyűjtő eszközt.

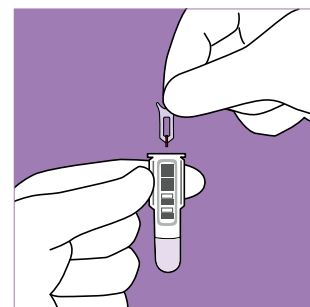


3 Helyezze a mintagyűjtőt a küvetta 1 percen belül. A mintagyűjtő nem érintkezik a küvettaiban lévő oldattal.

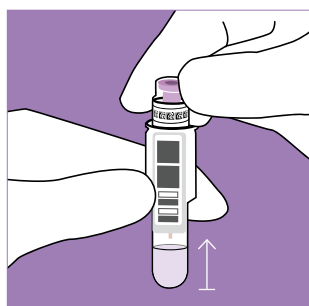

4 Zárja le szorosan a küvetta HbA1c reagens kupakkal. Ne nyomja be a reagens kupak ibolyaszín részét. Futtassa le a tesztet 5 percen belül. A küvetta tartsa függőlegesen, és ne rázza fel.

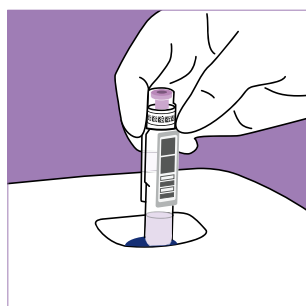


5 Válassza Mérés / Minta mérése lehetőséget a QuikRead go készüléken. Helyezze a küvetta a készülék mérőrekeszébe.

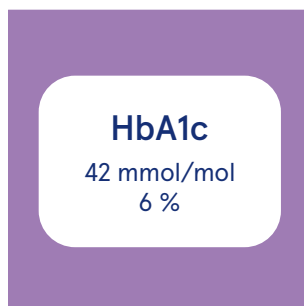

6 A mérési idő kevesebb mint 6 perc. Az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kielemeelkedik, ha a mérés befejeződött.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

QuikRead go HbA1c

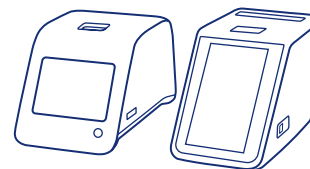

Készlet

Bontatlan készlet 2–8 °C-on: a készlet lejáratási idejéig
Bontatlan készlet 18–25 °C-on: 2 hónap



Reagenskupakok
tartályban

Bontatlan tubus 2–8 °C-on: a készlet lejáratási idejéig
Az első felbontás után 2–8 °C-on: 6 hónap / 18–25 °C-on: 2 hónap



Küveták

Bontatlan fólia tasak 2–8 °C-on: a készlet lejáratási idejéig
Bontatlan küveták felbontott fóliatasakkal:
2–8 °C-on: 6 hónap / 18–25 °C-on: 2 hónap



Felnyitott
küvetta

A mérés elvégzése előtt hagyja a puffert 18–25 °C-ra felmelegedni
A küvetta felnyitásától számított 1 órán belül végezze el a tesztet
A minta a kupakkal történő lezárást követő 5 percig stabil a küvetában



Mintagyűjtő
eszközök

Tárolás 2–25 °C-on: a Sample Collector 1µl mintagyűjtő
dobozon lévő lejáratási dátumáig



HbA1c
kontroll szett

Bontatlan üveg 2–8 °C-on: a lejáratási dátumig
Nyitott üveg 2–8 °C-on: legfeljebb 50 napig

Kapcsolatfelvétel és rendelés

Aidian Oy, odštěpný závod CZ.
Képviselő CZ, HU &
Délkelet Európa fiókroda

info@aidian.hu / +36 205 019 012
quikread.hu

Termék	Kat. szám
QuikRead go HbA1c és QuikRead go Sample Collector 1µl	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 db	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375