




QuikRead go[®] wrCRP és wrCRP+Hb

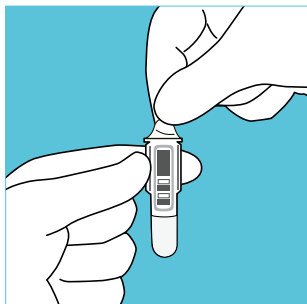


1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. A folyadék felszínének a küvetta jelölt két vonal között kell lennie. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.

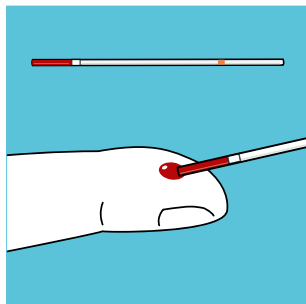

2 Töltse meg a narancssárgán csíkozott kapillárist a vérmintával (10 µl) a fehér dugóig. Győződjön meg arról, hogy nincs légbuborék a kapillárisban. Törölje le a felesleges mintát a kapilláris külső felületéről.

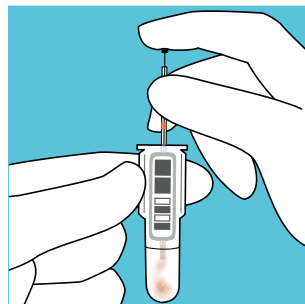


3 Helyezze a mintát (10 µl) tartalmazó kapillárist a küvetta és a dugattyú segítségével adja hozzá a mintát a küvetta-ban lévő pufferoldathoz. Győződjön meg arról, hogy a kapilláris teljesen kiürült.

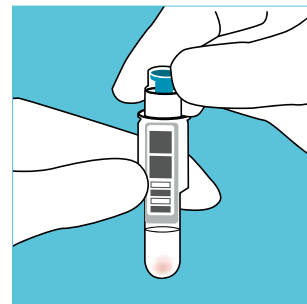

4 Jól zárja le a küvetta a wrCRP reagenst tartalmazó kupakkal. Ne nyomja be a kupak belső, türkiz színű részét. Végezze el a tesztet két órán belül.



5 Válassza ki a **Mérés** lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén.

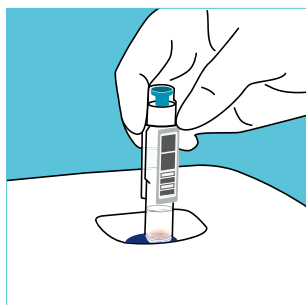

6 Helyezze a küvetta a készülék mérőrekeszében. A vonalkódnak Ön felé kell tekintenie. A készülék felismeri a minta típusát. A mérés folyamata figyelemmel kísérhető a kijelzőn.



7 A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik a mérőrekeszből. A QuikRead go wrCRP+Hb teszt esetében a Hberedmény a CRP-eredmény alatt jelenik meg.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

QuikRead go[®] wrCRP és wrCRP+Hb



Készlet

Bontatlan készlet 2–25°C-on: a készlet **lejárati idejéig**.



Reagenskupakok
tartályban

Bontatlan tartály 2–25°C-on: a készlet **lejárati idejéig**.
Az első felbontás után 2–25°C-on: **6 hónapig**.



Küvetták

Bontatlan alumínium védőfóliában 2–25°C-on: a készlet **lejárati idejéig**.
Felbontatlan küvetta az alumínium védőfólia első felbontása után:
2–8°C-on: **6 hónapig** / 18–25°C-on: **3 hónapig**.



Felnyitott
küvetta

A teszt elvégzése előtt hagyja a küvetta szobahőmérsékletűre (18–25°C) melegedni. A minta a pufferoldatban **2 órán** át stabil.
Végezze el a mérést a küvetta felnyitásától számított **2 órán** belül.



CRP
kontrollanyagok

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a **lejárati idejéig**.
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: **2 hónapig**.



Hb
kontrollanyag

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a **lejárati idejéig**.
Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: **1 hónapig**.

Kapcsolat

Aidian Oy Finnország

HU, CZ, SK, PL képviselő:

Csehország, Prága, Bělohorká 57

Magyarországi munkatárs telefonszáma:
+36205019012

Megrendelés: info@aidian.hu

www.aidian.hu / www.quikread.hu

www.tackleamr.com / www.testcrp.hu

Termék	Kat. szám
QuikRead go wrCRP kapillárisokkal (10 µl) és dugattyúkkal	146521
QuikRead go wrCRP+ Hb kapillárisokkal (10 µl) és dugattyúkkal	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl Capillaries	147851
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go készülék	135867