




QuikRead go[®] HbA1c

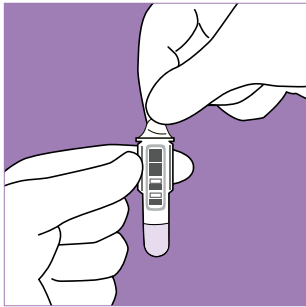


1 Ta av folien på kvyvetten. Ikke berør den klare flate delen på den nedre del av kvyvetten.

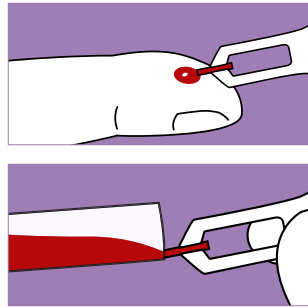


2 Hold QuikRead go Sample Collector 1µl omtrent horisontalt, pekende mot ytterkanten av bloddråpen. Fyll hele kapillærdelen av prøvetakingsenheten.

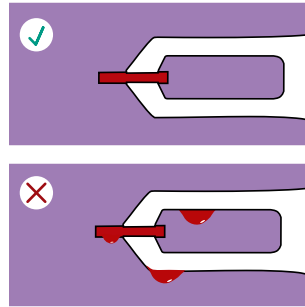


Viktig! Kontroller at kapillærdelen er fullstendig fylt. **Prøvetakingsenheten skal ikke tørkes av!** Hvis det er prøvemateriale på utsiden av prøvetakingsenheten må den kastes.

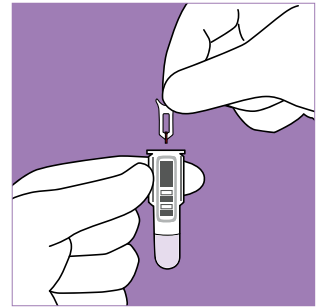

3 Sett prøvetakingsenheten i kvyvetten innen 1 minutt. Prøvetakingsenheten berører ikke løsningen i kvyvetten.

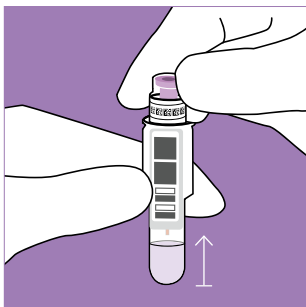

4 Lukk kvyvetten tett med en HbA1c reagenskork. Ikke trykk ned den fiolette delen. Utfør testen innen 5 minutter. **Hold kvyvetten loddrett og ikke rist.**

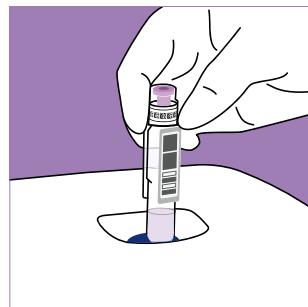

5 Velg **Analyse** i displayet på QuikRead go-instrumentet. Sett kvyvetten ned i målebrønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.



6 Når målingen er ferdig, vises resultatet i displayet og kvyvetten kommer automatisk opp.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

QuikRead go[®] HbA1c



Kit

Uåpnet kit i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet

Uåpnet kit i 18–25°C: **2 måneder**



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet

Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:

i 2–8°C: **6 måneder** / i 18–25°C: **2 måneder**



Åpnet kyvette

La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres. Testen må utføres innen

1 time fra kyvetten ble åpnet. Prøven er stabil i buffer i **5 minutter** når kyvetten er lukket med reagenskorken.



Boksen med reagenskorker

Uåpnet i 2–8°C: til **utløpsdato** på kitet

Etter første åpning i 2–8°C: **6 måneder** / i 18–25°C: **2 måneder**



Prøvetakings-enhet

Oppbevaring i 2–25°C:

til **utløpsdato** på Sample Collector 1µl esken



HbA1c -kontroller

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**

Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **50 dager**

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger:

ordre@aidian.no

www.aidian.no

www.quikread.com

Produkt	Art.nr
QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	154457