




# QuikRead go HbA1c

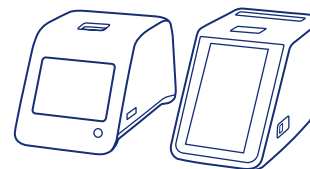


For QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument

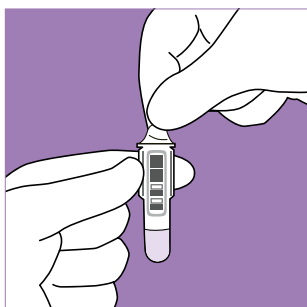


**1** Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på nedre del av kyvetten.

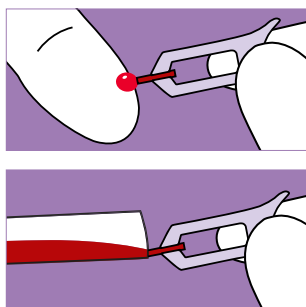


**2** Hold QuikRead go Sample Collector 1µl på skrå, pekende mot ytterkanten av blodråpen. Fyll kapillærdelen av prøvetakingsenheten helt.

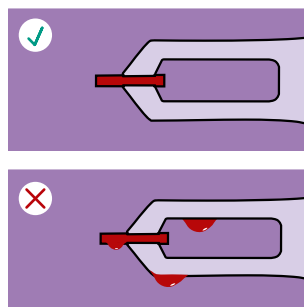


**Viktig!** Kontroller at kapillærdelen er fullstendig fylt. Prøvetakingsenheten skal ikke tørkes av! Hvis det er overflødig prøvemateriale på prøvetakingsenheten, må den kastes.

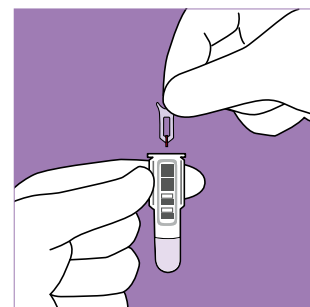


**3** Sett prøvetakingsenheten i kyvetten innen 1 minutt. Prøvetakingsenheten berører ikke løsningen i kyvetten.

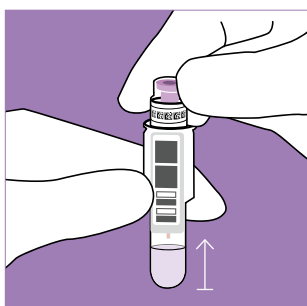

**4** Lukk kyvetten tett med en HbA1c reagentkork. Ikke trykk ned den fiolette delen. Utfør testen innen 5 minutter. Hold kyvetten loddrett og ikke rist.

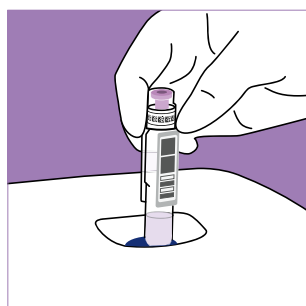


**5** Velg Analyse / Analyser prøve på skjermen på QuikRead go-instrumentet. Sett kyvetten ned i målebønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.

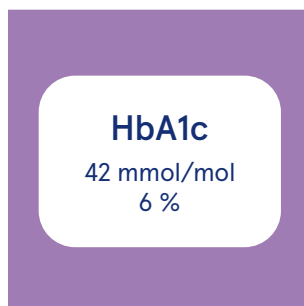

**6** Analysetiden er mindre enn 6 minutter. Når målingen er ferdig, vises resultatet på skjermen og kyvetten kommer automatisk opp.

Les bruksanvisningen før du utfører testen.

# QuikRead go HbA1c

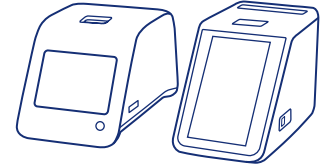

Kit

Uåpnet kit i 2–8°C: til utløpsdato på kitet  
Uåpnet kit i 18–25°C: 2 måneder



Boksen med reagenskorker

Uåpnet i 2–8°C: til utløpsdato på kitet  
Etter første åpning i 2–8°C: 6 måneder / i 18–25°C: 2 måneder



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–8°C: til utløpsdato på kitet  
Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:  
i 2–8°C: 6 måneder / i 18–25°C: 2 måneder



Åpnet kyvette

La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres. Testen må utføres innen 1 time fra kyvetten ble åpnet. Prøven er stabil i buffer i 5 minutter når kyvetten er lukket med reagenskorken.



Prøvetakings-enhet

Oppbevaring i 2–25°C: til utløpsdato på Sample Collector 1µl esken



HbA1c -kontroller

Uåpnet flaske i 2–8°C: til utløpsdato  
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil 50 dager

## Kontakt og bestillinger

Aidian Norge AS

info@aidian.no / +47 66785630

ordre@aidian.no

quikread.com

Produkt	Art.nr.
QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375