




# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb

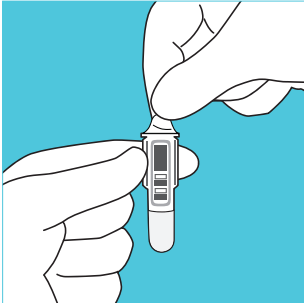


**1** Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på den nedre del av kyvetten.

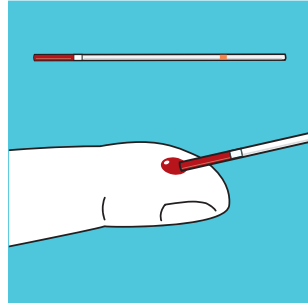


**2** Fyll det oransje-stripede kapillærrøret opp til den hvite stopperen (10 µl). Kontroller at det ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tørk av overflødig prøvemateriale på utsiden.

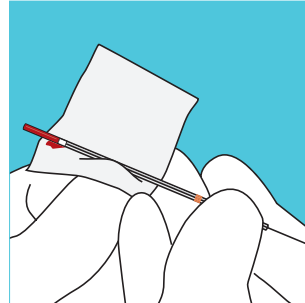

**3** Tørk bort eventuelt søl på utsiden av kapillæret med en myk klut eller serviett.

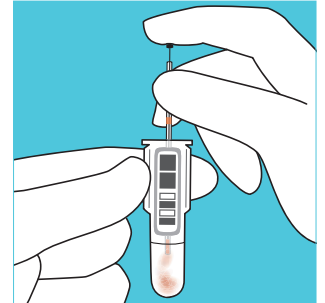


**4** Plasser kapillærrøret (10 µl) i bufferløsningen i kyvetten, og trykk ned stempelet. Sørg for at kapillærrøret er helt tømt.

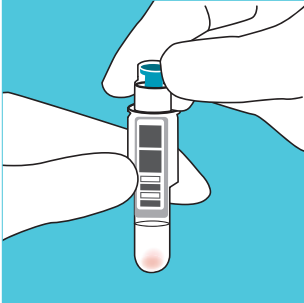

**5** Lukk kyvetten tett med en wrCRP reagenskork. Ikke trykk ned den turkise delen. Utfør testen innen 2 timer.



**6** Velg **Analyse** i displayet på QuikRead go-instrumentet.

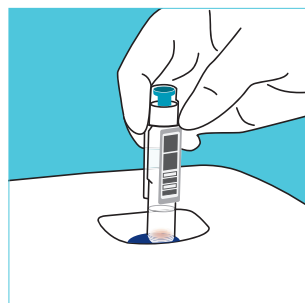

**7** Sett kyvetten ned i målebønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.



**8** Når målingen er ferdig, vises resultatet i displayet og kyvetten kommer automatisk opp. På QuikRead go wrCRP+Hb-testen, vises Hb-resultatet under CRP-resultatet.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb



Kit

Uåpnet kit i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet



Boksen med reagenskorker

Uåpnet i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet  
Etter første åpning i 2–25°C: **6 måneder**



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet  
Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:  
i 2–8°C: **6 måneder** / i 18–25°C: **3 måneder**



Åpnet kyvette

La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres  
Testen må utføres innen **2 timer** fra kyvetten ble åpnet  
Prøven er stabil i buffer i **2 timer**



CRP-kontroller

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**  
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **2 måneder**



Hb-kontroll

Uåpnet flaske i 2–8°C: til **utløpsdato**  
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil **1 måned**

## Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no

www.quikread.com

Produkt	Art.nr.
QuikRead go wrCRP med kapillærrør (10 µl) og stempler	146521
QuikRead go wrCRP+Hb med kapillærrør (10 µl) og stempler	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control Low	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl kapillærrør	147851
QuikRead stempler	132655
QuikRead go Instrument	135867