




QuikRead go wrCRP+Hb

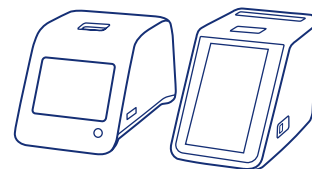


For QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument

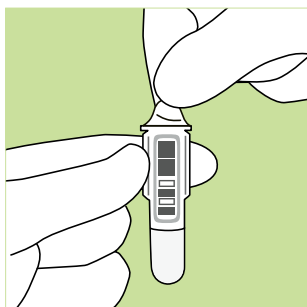


1 Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på nedre del av kyvetten.

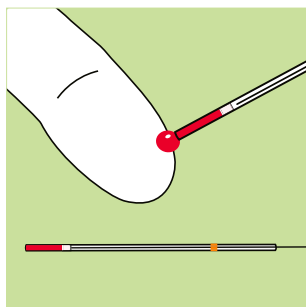


2 Fyll det oransje-stripede kapillærrøret opp til den hvite stopperen (10 µl). Kontroller at det ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tørk av overflødig prøvemateriale på utsiden.

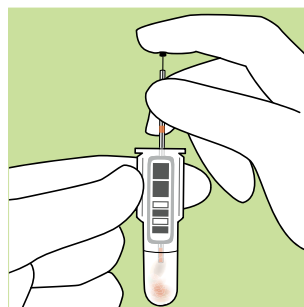


3 Plasser kapillærrøret (10 µl) i bufferløsningen i kyvetten, og trykk ned stempelet. Sørg for at kapillærrøret er helt tømt.

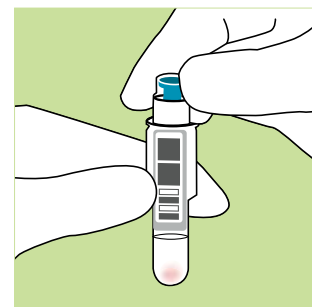


4 Lukk kyvetten tett med en turkis reagenskork. Ikke trykk ned den indre fargede delen. Utfør testen innen 2 timer.

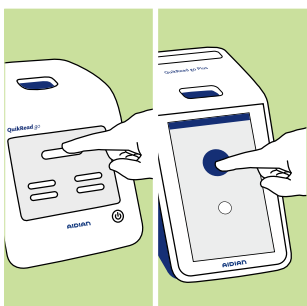

5 Velg Analyse / Analyser prøve på skjermen på QuikRead go-instrumentet.

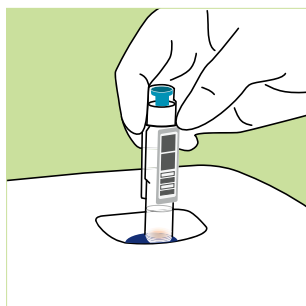


6 Sett kyvetten ned i målebrønnen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg.

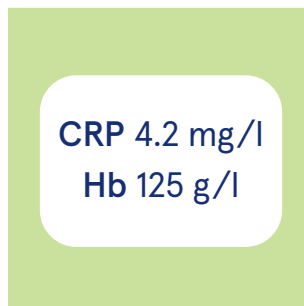

7 Analysetiden er 2 minutter. Når målingen er ferdig, vises resultatet på skjermen og kyvetten kommer automatisk opp.

Les bruksanvisningen før du utfører testen.

QuikRead go wrCRP+Hb

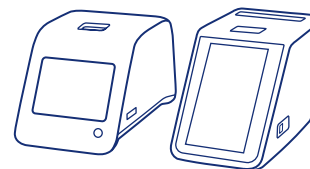

Kit

Uåpnet kit i 2–25°C: til utløpsdato på kitet



Boksen med
reagenskorker

Uåpnet i 2–25°C: til utløpsdato på kitet
Etter første åpning i 2–25°C: 6 måneder



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–25°C: til utløpsdato på kitet

Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:
i 2–8°C: 6 måneder / i 18–25°C: 3 måneder



Åpnet
kyvette

La buffer varmes opp til 18–25°C før testen utføres
Testen må utføres innen 2 timer fra kyvetten ble åpnet
Prøven er stabil i buffer i 2 timer



CRP-kontroller

Uåpnet flaske i 2–8°C: til utløpsdato
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil 2 måned



Hb-kontroll

Uåpnet flaske i 2–8°C: til utløpsdato
Åpnet flaske i 2–8°C: inntil 1 måned

Kontakt og bestillinger

Aidian Norge AS

info@aidian.no / +47 66785630

ordre@aidian.no

quikread.com

Produkt	Art. nr.
QuikRead go wrCRP+Hb med kapillærrør (10 µl) og stempler	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl kapillærrør	147851
QuikRead stempler	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375