




QuikRead go HbA1c

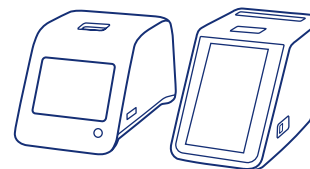


Do QuikRead go Instrument i QuikRead go Plus Instrument

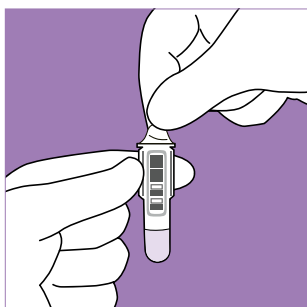


1 Zdejmij z kuwety ochronną folię. Nie dotykaj przezroczystych płaskich powierzchni w dolnej części kuwety.

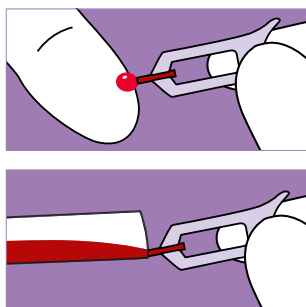


2 Trzymaj narzędzie do pobierania próbek QuikRead go Sample Collector 1μl prawie poziomo tuż pod powierzchnią próbki. Całkowicie napełnij część kapilarną narzędzia do pobierania próbek.

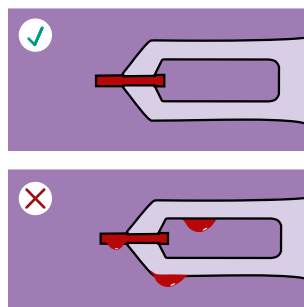


Uwaga! Sprawdź, czy kapilara jest całkowicie napełniona. Nie wycieraj narzędzi do pobierania próbek! Jeśli na narzędziu do pobierania próbek znajduje się nadmiar próbki, narzędzie wyrzucić.

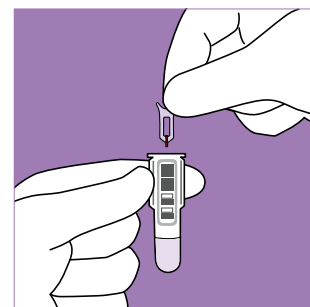


3 Umieść narzędzie w kuwecie w ciągu 1 minuty. Narzędzie nie dotyka roztworu w kuwecie.

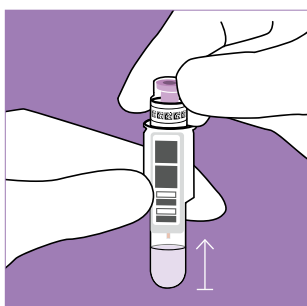

4 Zamknij szczelnie kuwetę wieczkiem z odczynnikami HbA1c. Nie naciskaj na wewnętrzną fioletową część wieczka. Test wykonaj w ciągu 5 minut. Trzymaj kuwetę w pozycji pionowej i nie wstrząsaj nią.

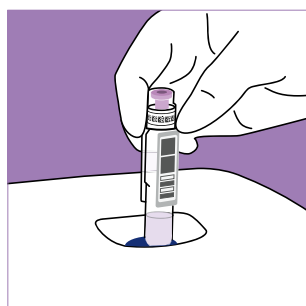


5 Należy wybrać Pomiar / Pomiar próbki na ekranie instrumentu QuikRead go. Włóż kuwetę do urządzenia. Kod kreskowy powinien być skierowany do użytkownika.

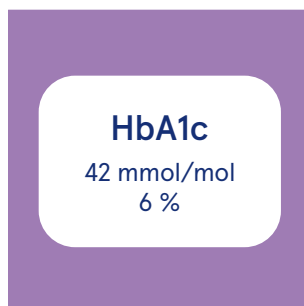

6 Czas pomiaru wynosi poniżej 6 minut. Wynik wyświetlany jest na ekranie, a kuweta automatycznie wysunie się po zakończeniu pomiaru.

Przed wykonaniem testu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.

QuikRead go HbA1c

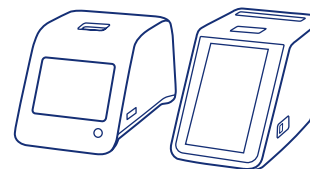

Zestaw

Zamknięty zestaw w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności zestawu. Zamknięty zestaw w temperaturze 18–25°C: 2 miesiące



Tuba zawierająca wieczkasz odczynnikiem

Zamknięta tuba w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności zestawu. Po pierwszym otwarciu w temperaturze 2–8°C: 6 miesięcy / w temperaturze 18–25°C: 2 miesiące



Kuwety

W zamkniętej zewnętrznej folii ochronnej w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności zestawu. Zamknięte kuwety po otwarciu zewnętrznej folii ochronnej: w temperaturze 2–8°C: 6 miesięcy / w temperaturze 18–25°C: 2 miesiące



Otwarta kuweta

Przed wykonaniem testu kuwetę należy ogrzać do temperatury 18–25°C. Test należy wykonać w ciągu 1 godziny od otwarcia kuwety. Próbkę w kuwecie zamkniętej wieczkiem jest stabilna przez 5 minut.



Narzędzia do pobierania próbek

Przechowywanie w temperaturze 2–25°C: do daty ważności podanej na opakowaniu z narzędziami do pobierania próbek Sample Collector 1µl



HbA1c Control Set (zestaw kontroli)

Zamknięta folia w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności Po pierwszym otwarciu folia w temperaturze 2–8°C: 50 dni

Kontakt i zamówienia

Aidian Poland Sp. z o.o.

info@aidian.pl / +48 570 582 339
aidian.pl

Produkt	Nr kat.
QuikRead go HbA1c wraz z QuikRead go Sample Collector 1µl	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375