




# QuikRead go CRP

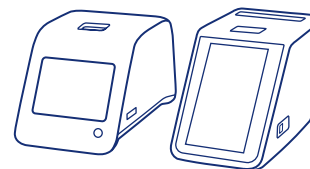


Dla QuikRead go Instrument i QuikRead go Plus Instrument

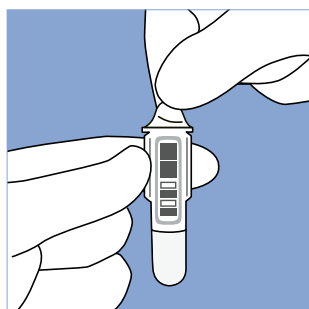


**1** Zdejmij z kuwety aluminiowe przykrycie. Nie dotykaj przezroczystych płaskich powierzchni w dolnej części kuwety.

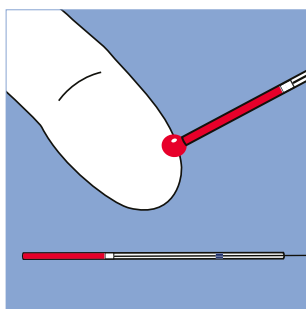


**2** Napełnij kapilarę próbką krwi (20 µl) aż po biały ogranicznik. Upewnij się, że w kapilarze nie ma pęcherzyków powietrza. Wytrzyj resztki krwi z zewnętrznej powierzchni kapilary.

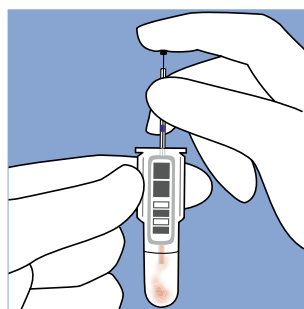


**3** Włóż kapilarę z próbką krwi (20 µl) do roztworu buforu w kuwecie i naciśnij tłoczek. Upewnij się, że kapilara jest całkowicie pusta.

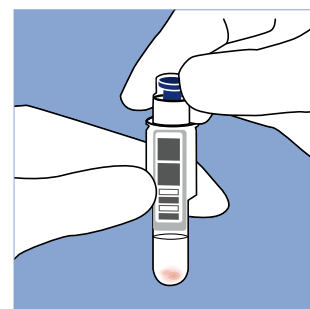


**4** Zamknąć szczelnie kuwetę niebieskim korkiem odczynnika. Nie naciskać kolorowej wewnętrznej części nasadki odczynnika. Test wykonaj w ciągu 2 godzin.

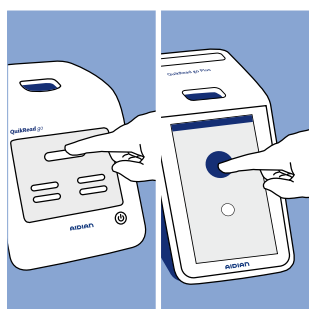

**5** Należy wybrać Pomiar / Pomiar próbki na ekranie instrumentu QuikRead go.

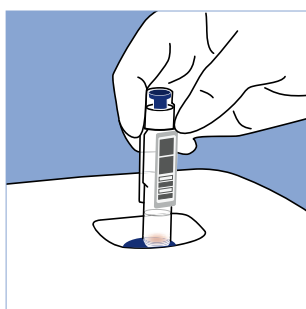


**6** Umieść kuwetę w studzience pomiarowej urządzenia. Kod kreskowy powinien być skierowany do użytkownika.

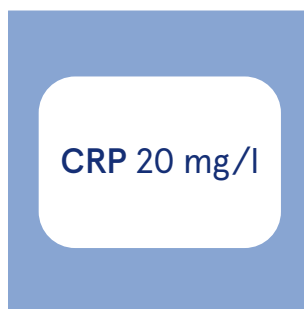

**7** Czas pomiaru wynosi 2 minuty. Wynik wyświetlany jest na ekranie a kuweta wysunie się automatycznie po zakończeniu pomiaru.

Przed wykonaniem testu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

# QuikRead go CRP

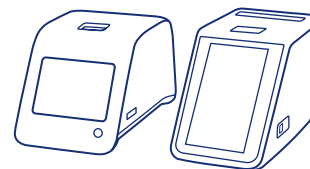

Zestaw

Zamknięty zestaw w temperaturze 2–8°C:  
do upływu daty ważności zestawu



Tuba zawierająca  
wieczka z  
odczynnikami

Przechowywanie w temperaturze 2–8°C:  
do upływu daty ważności zestawu  
  
Przechowywanie w temperaturze 18–25°C:  
1 miesiąc (7,5 godz. dziennie przez 3 miesiące)



Kuwety

Zamknięta zewnętrzna torebka foliowa w temperaturze 2–25°C:  
do upływu daty ważności zestawu  
  
Zamknięte kuwety po otwarciu zewnętrznej torebki foliowej w tem-  
peraturze 2–8°C: 6 miesięcy / w temperaturze 18–25°C: 3 miesiące



Otwarta  
kuweta

Przed wykonaniem testu kuwetę z buforem należy ogrzać do  
temperatury 18–25°C. Test należy wykonać do 2 godzin od otwarcia  
kuwety. Próbkę w buforze jest stabilna przez maksymalnie 2 godziny.



Kontrole CRP

Zamknięta fiolka w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności  
Otwarta fiolka w temperaturze 2–8°C: 2 miesiące

## Kontakt i zamówienia

Aidian Poland Sp. z o.o.

info@aidian.pl / +48 570 582 339  
quikread.com

| Produkt                                  | Nr kat. |
|------------------------------------------|---------|
| QuikRead go CRP z kapilarami i tłoczkami | 135171  |
| QuikRead go CRP Control                  | 153764  |
| QuikRead go CRP Control High             | 153763  |
| QuikRead Capillaries (20 µl)             | 67962   |
| QuikRead Plungers                        | 67966   |
| QuikRead go Instrument                   | 135867  |
| QuikRead go Plus Instrument              | 155375  |