




QuikRead go iFOBT

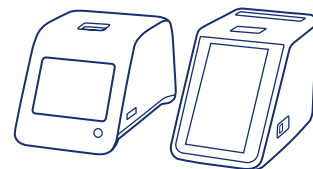


Do QuikRead go Instrument i QuikRead go Plus Instrument

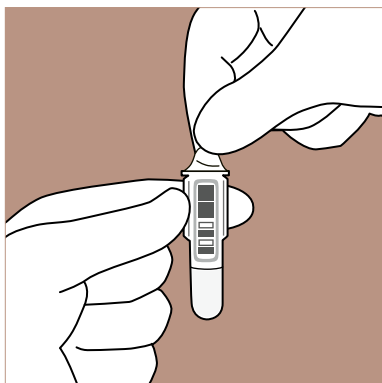


1 Zdejmij z kuwety aluminiowe przykrycie. Nie dotykaj przezroczystych płaskich powierzchni w dolnej części kuwety.

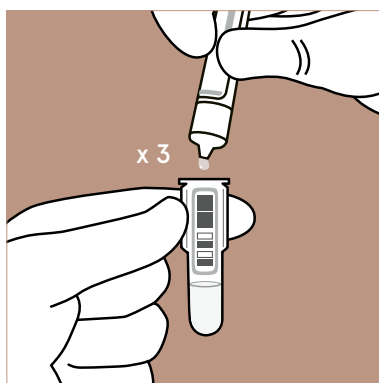


2 Wymieszaj, odwracając probówkę i odłamując jej końcówkę. Pierwsze trzy krople zlikwiduj. Dalsze trzy krople dodaj do kuwety.

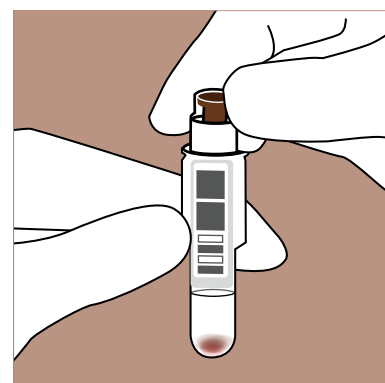


3 Zamknij szczelnie kuwetę wieczkiem z odczynnikiem FOB. Nie naciskaj wewnętrznej brązowej części wieczka. Test wykonaj w ciągu 2 godzin.

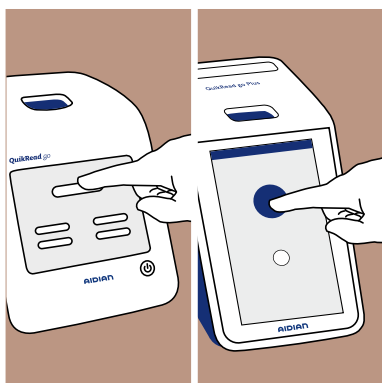

4 Należy wybrać Pomiar / Pomiar próbki na ekranie instrumentu QuikRead go.

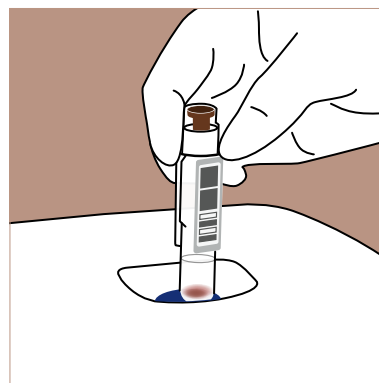


5 Umieść kuwetę w studzience pomiarowej urządzenia. Kod kreskowy powinien być skierowany do użytkownika.

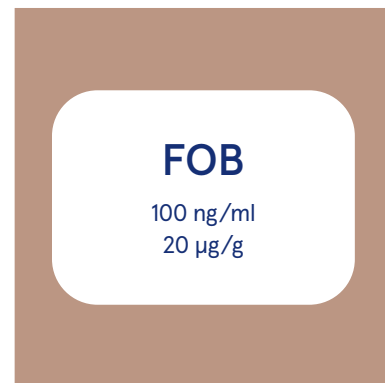

6 Czas pomiaru wynosi 2 minuty. Wynik wyświetli się na ekranie a kuweta automatycznie wysunie się po zakończeniu pomiaru.

Przed wykonaniem testu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

QuikRead go iFOBT

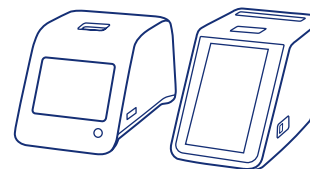

Zestaw

Zamknięty zestaw w temperaturze 2–8°C:
do upływu daty ważności zestawu.



Tuba zawierająca
wieczkak
odczynnikiem

Przechowywanie w temperaturze: 2–8°C do upływu daty ważności
zestawu. Przechowywanie w temperaturze 18–25°C: 1 miesiąc (8 godz.
dziennie przez 3 miesiące).



Kuwety

Zamknięta zewnętrzna torebka foliowa w temperaturze 2–25°C:
do upływu daty ważności zestawu. Zamknięte kuwety po otwarciu
zewnętrznej torebki foliowej w temperaturze 2–8°C: 6 miesięcy /
w temperaturze 18–25°C: 3 miesiące.



Otwarta
kuweta

Przed wykonaniem testu kuwetę z buforem należy ogrzać do
temperatury 18–25°C. Test należy wykonać do 2 godzin od otwarcia
kuwety. Próbkę w buforze jest stabilna przez maksymalnie 2 godziny.



QuikRead
FOB Positive
Control

Przechowywanie w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności.



QuikRead go
iFOBT Control
Quantitative

Zamknięta fiolka w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności.
Po pierwszym otwarciu fiolkę przechowywać w temperaturze 2–8°C:
1 miesiąc.



QuikRead iFOB
Sampling Set

Przechowywać w temperaturze 2–25°C: do upływu daty ważności.
Probówki testowe zawierające próbki można przechowywać w tempe-
raturze 2–8°C przez 7 dni lub w temperaturze 18–25°C przez 5 dni.

Kontakt i zamówienia

Aidian Poland Sp. z o.o.

info@aidian.pl / +48 570 582 339

quikread.com

Produkt	Nr kat.
QuikRead go iFOBT	151051
QuikRead FOB Positive Control	06027
QuikRead go iFOBT Control Quantitative	152390
QuikRead iFOB Sampling Set	151052
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375