




# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c

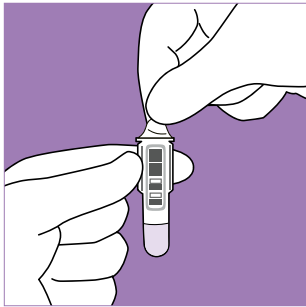


**1** Ta bort folieskyddet från kyvetten. Vidrör ej den blanka nedre delen av kyvetten.

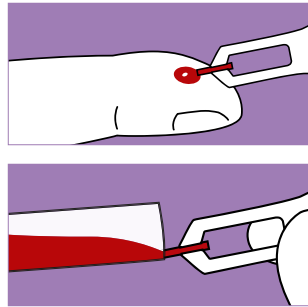


**2** Håll QuikRead go Sample Collector 1µl nästan i ett horisontalt läge under ytan av bloddroppen och fyll kapillärdelen av provinsamlare helt.

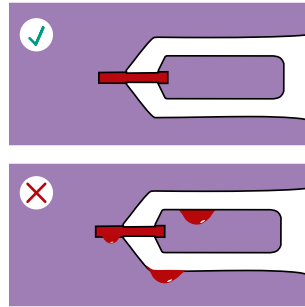


**OBS!** Kontrollera att kapillärdelen är helt fylld. **Torka inte av provinsamlaren!** Om det finns överskott av prov (se bild) på provinsamlaren, kasta bort det.

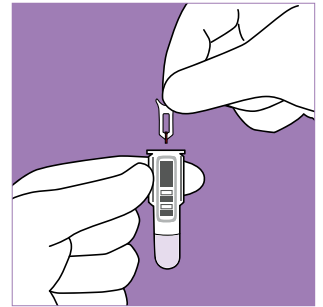

**3** Sätt ner provinsamlaren i kyvetten inom 1 minut. Provinsamlaren kommer inte i kontakt med reagensen i kyvetten.

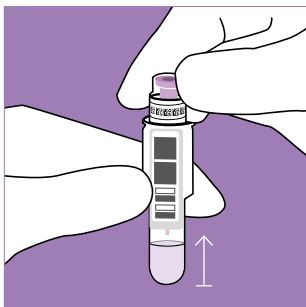

**4** Sätt på reagenskorken med HbA1c ordentligt. Tryck inte ner den lila inre delen av korken. Efter att provet satts till kyvetten skall analys köras inom 5 minuter. **Håll kyvetten upprätt, den får inte skakas om.**

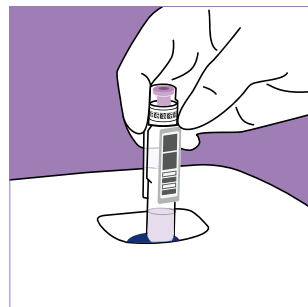

**5** Välj **Analysera** på QuikRead go instrumentets display. Placera kyvetten i mätbrunnen. Streckkoden ska vara vänd emot dig.



**6** När analysen är klar visas resultatet på displayen och kyvetten kommer automatiskt upp ur mätbrunnen.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagen i förpackningen.

# QuikRead go<sup>®</sup> HbA1c



Reagenskit

Förvaring av öppnat kit i 2–8°C: hållbart till **utgångsdatum**

Förvaring av öppnat kit i 10–25°C: hållbart i **2 månader**



Kyvetter

Förvaring i oöppnad innerförpackning i 2–8°C: till **utgångsdatum**

Förvaring utan innerförpackning: 2–8°C: hållbara i **6 månader** /  
18–25°C: hållbara i **2 månader**



Öppnad kyvett

Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs

Utför testet inom **en timme** efter att kyvetten öppnats

Provet är stabilt i kyvetten i **5 minuter** med reagenskork på



Reagenskorkar

Förvaring i oöppnat rör i 2–8°C: till **utgångsdatum**

I öppnat rör i 2–8°C: hållbara i **6 månader** / 18–25°C hållbara i  
**2 månader**



Provinsamlare

Förvaring i 2–25°C: till **utgångsdatum** av Sample Collector 1µl kit



HbA1c  
kontrollset

Oöppnad flaska i 2–8°C: hållbar till **utgångsdatum**

Öppnad flaska i 2–8°C: hållbar upp till **50 dagar**

## Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se

Tel. 08-623 04 00

För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se

www.quikread.com

Produkt	Art.nr
QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tester	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 st	154457