




# QuikRead go CRP

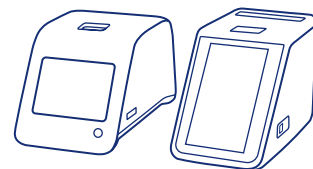


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

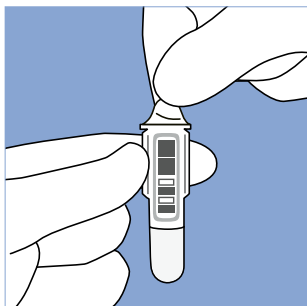


**1** Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

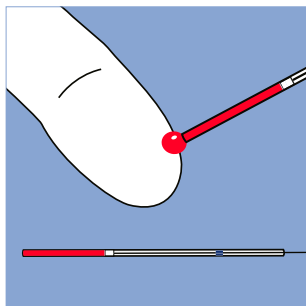


**2** Odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (20 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

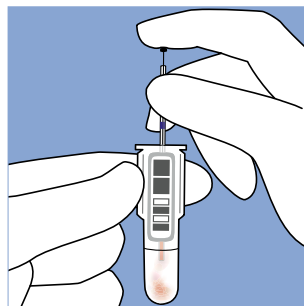


**3** Vložte kapiláru so vzorkou krvi (20 µl) do kyvety s puľom a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

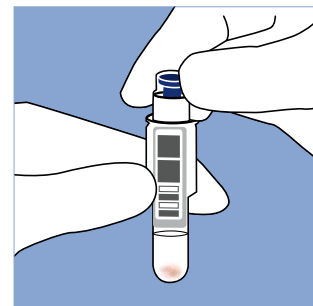

**4** Kyvetu pevne uzavrite modrým viečkom s reageniou. Netlačte na vnútornú farebnú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

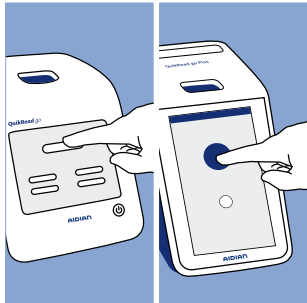

**5** Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky.

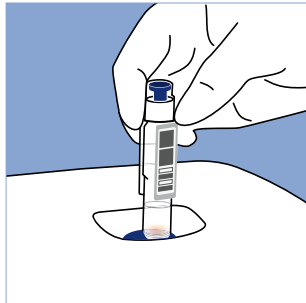


**6** Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.



**7** Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

# QuikRead go CRP

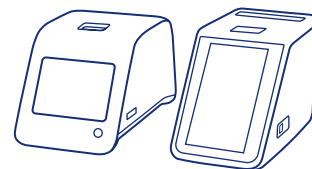

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy



Tuba obsahujúca  
viečka  
s reagensiou

Skladovanie pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy

Skladovanie pri teplote 18–25°C: 1 mesiac  
(7,5 hodiny denne – 3 mesiace)



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C:  
do dátumu expirácie súpravy

Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote  
2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiace



Otvorená  
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete vytemperovať na teplotu  
18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kyvety.

Vzorka v puferi je stabilná po dobu 2 hodín



Kontrolné  
materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie

Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiace

## Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP súprava s kapilármi a piestikmi	135171
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead Capillaries (20 µl)	67962
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375