




QuikRead go CRP+Hb

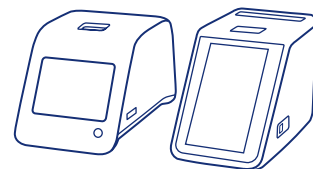


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

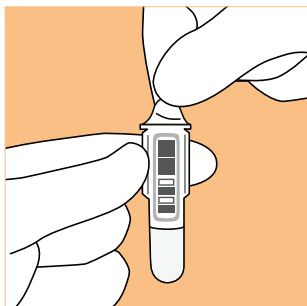


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

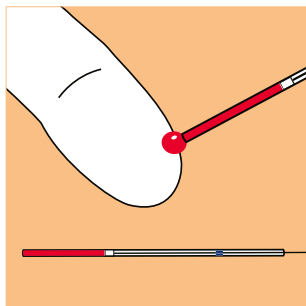


2 Odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (20 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

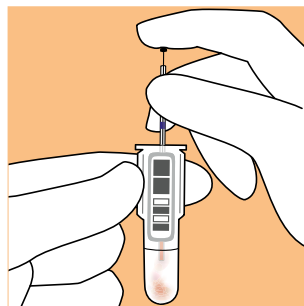


3 Vložte kapiláru so vzorkou krvi (20 µl) do kyvety s puňrom a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

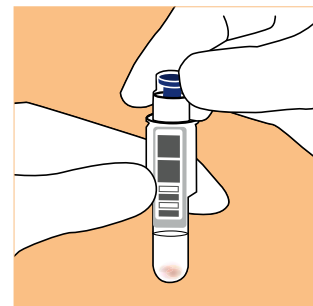


4 Kyvetu pevne uzavrite modrým viečkom s reageniou. Netlačte na vnútornú farebnú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

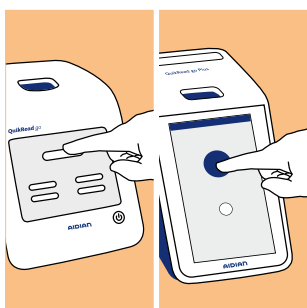

5 Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky.

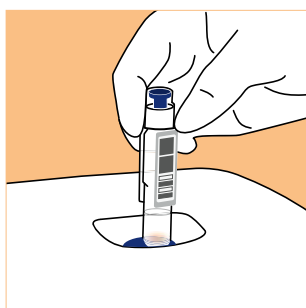


6 Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.

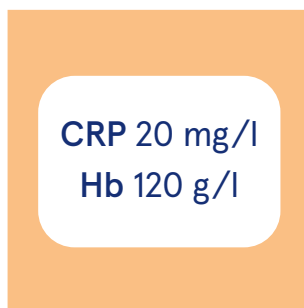

7 Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go CRP+Hb

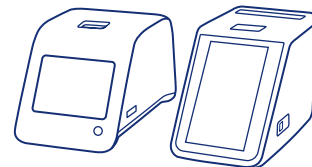

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravyTuba obsahujúca
viečka
s reagensiouSkladovanie pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy
Skladovanie pri teplote 18–25°C: 1 mesiac
(7,5 hodiny denne – 3 mesiace)

Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C:
do dátumu expirácie súpravyNeotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote
2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiaceOtvorená
kyvetaPred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete vytemperovať na teplotu
18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kyvety.
Vzorka v pufri je stabilná po dobu 2 hodín.Kontrolné
materiály CRPNeotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiaceKontrolný
materiál HbNeotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 1 mesiac

Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP+Hb súprava s kapilárkami a piestikmi	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead Capillaries (20 µl)	67962
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375