




QuikRead go HbA1c

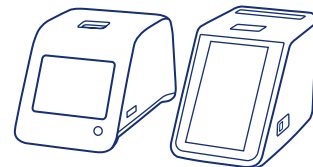


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

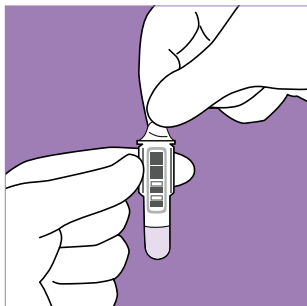


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

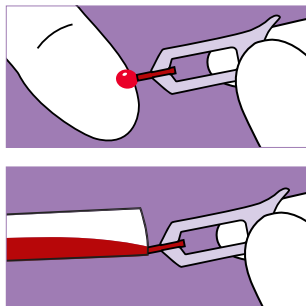


2 Držte QuikRead go Sample Collector 1µl takmer vodorovne pod povrchom vzorky. Úplne naplňte celú kapilárnu časť odberovej pomôcky.

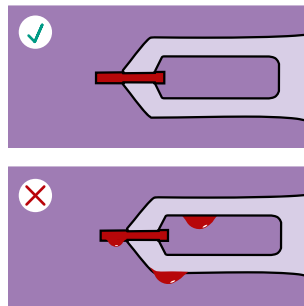


Poznámka! Skontrolujte, či je celá kapilára naplnená. Odberovú pomôcku neotierajte! Ak je na odberovej pomôcke prebytočná vzorka, odberovú pomôcku vyhod'te.

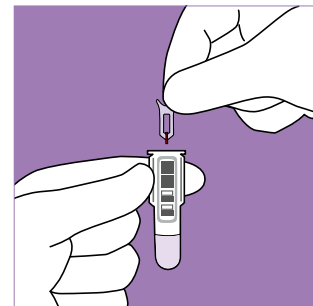


3 Do 1 minúty vložte odberovú pomôcku do kyvety. Odberová pomôcka sa nedotýka roztoku v kyvete.

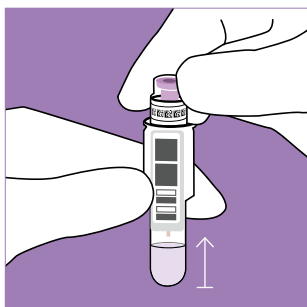

4 Kyvetu pevne uzatvoríte viečkom s reageniou pre HbA1c. Netlačte na vnútornú fialovú časť viečka. Test vykonajte do 5 minút. Kyvetu držte v zvislej polohe a nepretrepávajte ju.

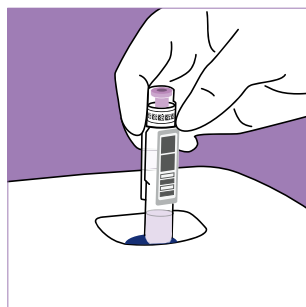


5 Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolíte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky. Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom smerom k sebe.

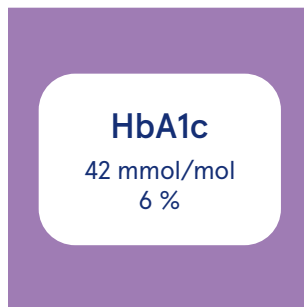

6 Čas merania je menej ako 6 minút. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go HbA1c

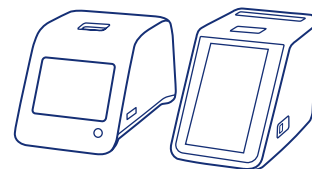

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy
Neotvorená súprava pri teplote 18–25°C: 2 mesiace



Tuba obsahujúca
viečka
s reagensiou

Neotvorená tuba pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy
Po prvom otvorení pri teplote 2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C:
2 mesiace



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 2 mesiace



Otvorená
kyveta

Pred testovaním kyvetu vytemperujte na teplotu 18–25°C
Test je nutné vykonať do 1 hodiny od otvorenia kyvety
Vzorka v kyvete uzatvorenej viečkom je stabilná po dobu 5 minút



Odberové
pomôcky

Skladovanie pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie uvedenej
na krabičke s odberovými pomôckami Sample Collector 1µl



HbA1c Control
Set (kontrolný
materiál)

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 50 dní

Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go HbA1c s QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testov	151058
QuikRead go HbA1c Control Set (kontrolný materiál)	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 ks	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375