




# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP

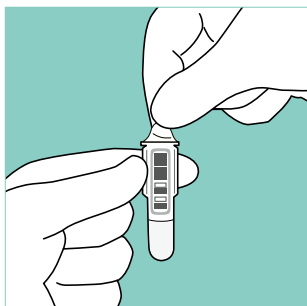


**1** Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

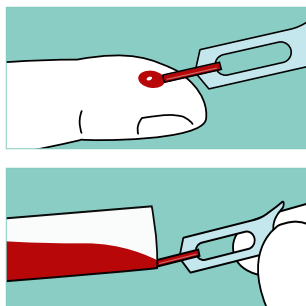


**2** Držte QuikRead go Sample Collector 10µl takmer vodorovne pod povrchom vzorky. Úplne naplňte celú kapilárnu časť odberovej pomôcky.

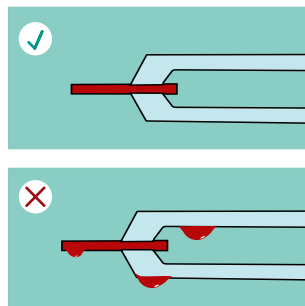


**Poznámka!** Skontrolujte, či je celá kapilára naplnená. **Odberovú pomôcku neotierajte!** Pokiaľ je na odberovej pomôcke prebytočná vzorka, odberovú pomôcku vyhod'te.

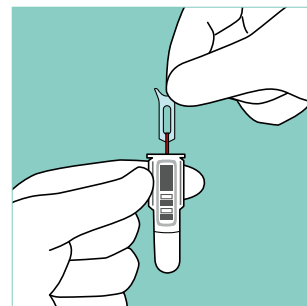

**3** Do 2 minút vložte odberovú pomôcku do kyvety.

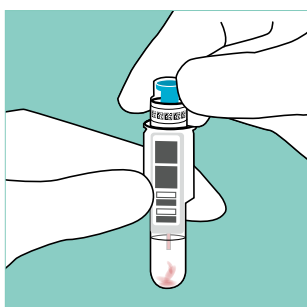

**4** Zatvorte kyvetu viečkom s reagensiou pre easy CRP. Netlačte na vnútornú tyrkysovú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

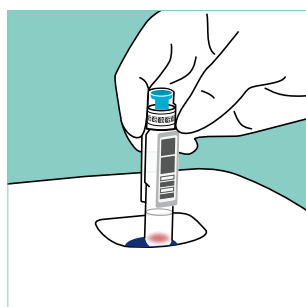

**5** Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť **Meranie**. Vložte kyvetu do meracieho otvoru prístroja čiarovým kódom k sebe.



**6** Po skončení merania sa na displeji zobrazia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracieho otvoru.

Pred vykonaním testu si prosím prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP



Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy

Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 2–8°C: **6 mesiacov** / pri teplote 18–25°C: **3 mesiace**



Otvorená kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete zahriať na teplotu 18–25°C  
Test je nutné vykonať do **2 hodín** od otvorenia kyvety  
Vzorka v pufrí je stabilná po dobu **2 hodín**



Tuba obsahujúca viečka s reagensiou

Neotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy  
Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: **6 mesiacov**



Odberové pomôcky

Skladovanie pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** uvedeného na krabičke s odberovými pomôckami Sample Collector 10µl



Kontrolné materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**  
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **2 mesiace**

## Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko

Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR  
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel. +421 944 313 888

[www.aidian.sk](http://www.aidian.sk) / [www.quikread.sk](http://www.quikread.sk)

[www.tackleamr.com](http://www.tackleamr.com) / [www.testcrp.sk](http://www.testcrp.sk)

Produkt	Kat. č.
QuikRead go easy CRP s QuikRead go Sample Collector 10µl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
Prístroj QuikRead go	135867
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211