




QuikRead go easy CRP

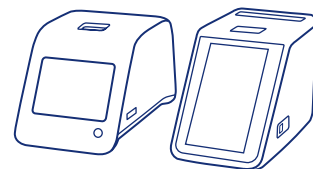


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

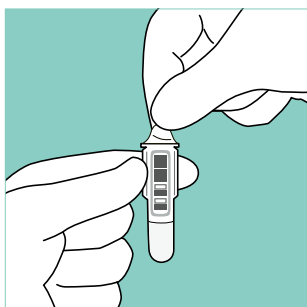


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

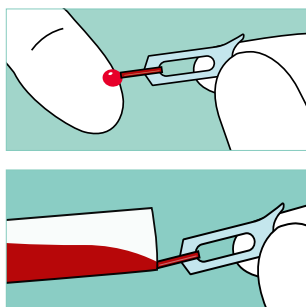


2 Držte QuikRead go Sample Collector 10µl takmer vodorovne pod povrchom vzorky. Úplne naplňte celú kapilárnu časť odberovej pomôcky.

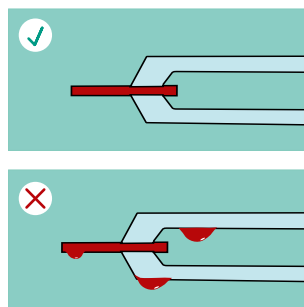


Poznámka! Skontrolujte, či je celá kapilára naplnená. Odberovú pomôcku neotierajte! Ak je na odberovej pomôcke prebytočná vzorka, odberovú pomôcku vyhodte.

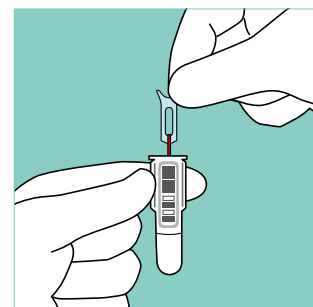


3 Do 2 minút vložte odberovú pomôcku do kyvety.

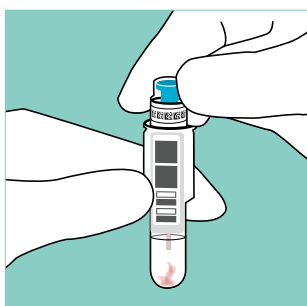

4 Zatvorte kyvetu viečkom s reagensiou pre easy CRP. Netlačte na vnútornú tyrkysovú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

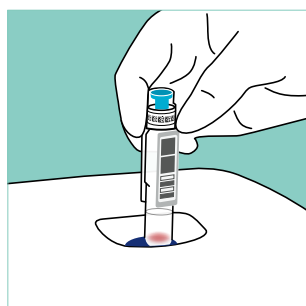


5 Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky. Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.

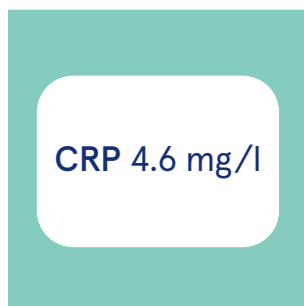

6 Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go easy CRP

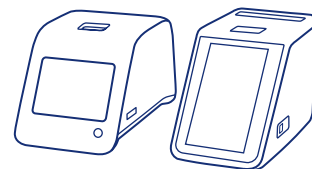

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravyTuba obsahujúca
viečka
s reagensiouNeotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravyPo prvom otvorení pri teplote 2–25°C: 6 mesiacov

Kvetety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C:
do dátumu expirácie súpravyNeotvorené kvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote
2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiaceOtvorená
kvetaPred vykonaním testu nechajte pufer v kvete vytemperovať na teplotu
18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kvety.Vzorka v pufri je stabilná po dobu 2 hodín.Odberové
pomôckySkladovanie pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie uvedeného na
krabičke s odberovými pomôckami QuikRead go Sample Collector 10µlKontrolné
materiály CRPNeotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácieOtvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiace

Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go easy CRP s QuikRead go Sample Collector 10µl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375