




# QuikRead go iFOBT

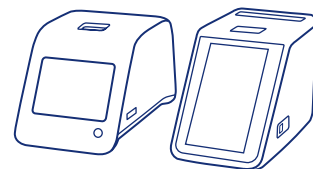


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

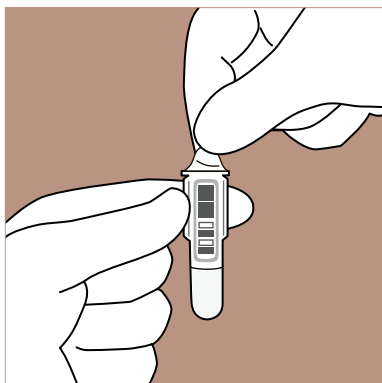


**1** Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

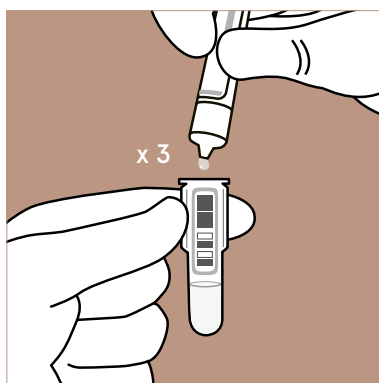


**2** Otočte odberovú skúmavku a odlomte špičku. Prvé tri kvapky zlikvidujte. Ďalšie tri kvapky aplikujte do kyvety.

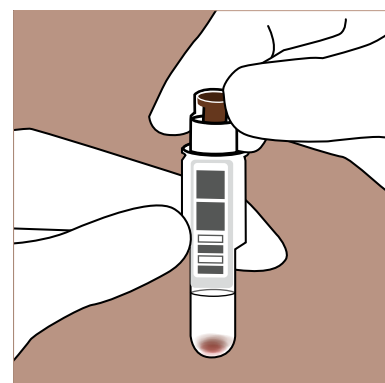


**3** Kyvetu dôkladne uzatvorte viečkom s reagensiou FOB. Netlačte na vnútornú hnedú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

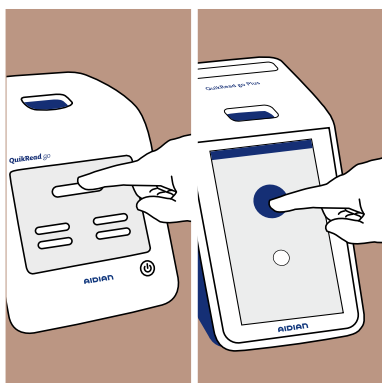

**4** Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky.

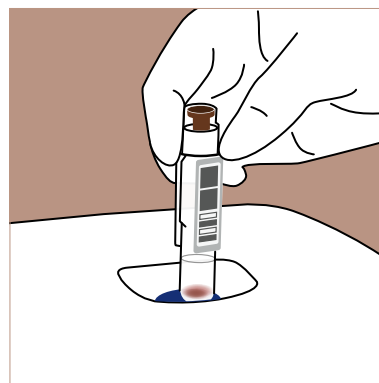


**5** Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom smerom k sebe.

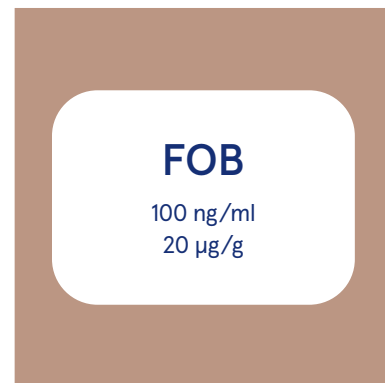

**6** Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

# QuikRead go iFOB

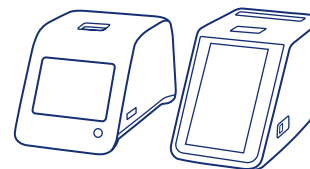

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy



Tuba obsahujúca  
viečka  
s reagensiou

Skladovanie pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie súpravy  
Skladovanie pri teplote 18–25°C: 1 mesiac (8 hodín denne: 3 mesiace)



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiace.



Otvorená  
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete vytemperovať na teplotu 18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kyvety. Vzorka v pufrí je stabilná po dobu 2 hodín.



QuikRead  
FOB Positive  
Control

Skladovanie pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie



QuikRead go  
iFOB Control  
Quantitative

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie  
Fľaštička po prvom otvorení pri teplote 2–8°C: 1 mesiac



QuikRead iFOB  
Sampling Set

Skladovanie pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie  
Odberové skúmavky so vzorkou je možné skladovať pri teplote 2–8°C po dobu 7 dní alebo pri teplote 18–25°C po dobu 5 dní

## Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go iFOB	151051
QuikRead FOB Positive Control	06027
QuikRead go iFOB Control Quantitative	152390
QuikRead iFOB Sampling Set	151052
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375