




QuikRead go[®] wrCRP a wrCRP+Hb

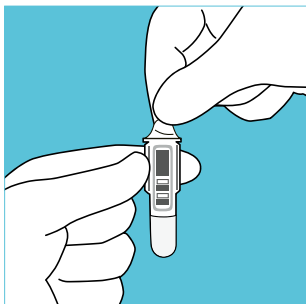


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

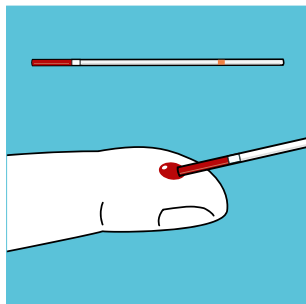

2 Zostavte kapiláru s oranžovým prúžkom a odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (10 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

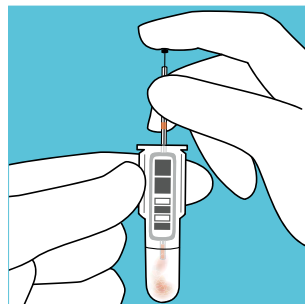


3 Vložte kapiláru so vzorkou krvi (10 µl) do kyvety s pufrom a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

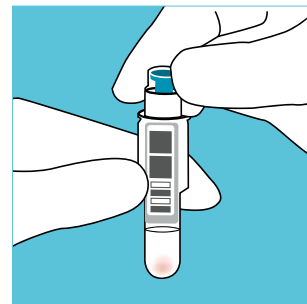

4 Kyvetu dôkladne uzatvorte viečkom s reageniou wrCRP. Netlačte na vnútornú tyrkysovú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.



5 Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť **Meranie**.

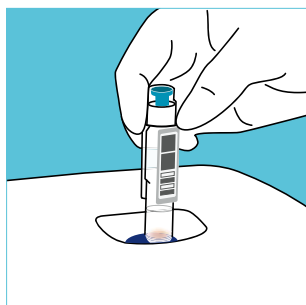

6 Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.



7 Po skončení merania sa na displeji zobrazia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracej komôrky. Pri teste QuikRead go wrCRP+Hb sa výsledok Hb zobrazuje pod výsledkom CRP.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go[®] wrCRP a wrCRP+Hb



Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy.



Tuba obsahujúca
viečka
s reagensiou

Neotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy.
Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: **mesiacov**.



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 28°C: **6 mesiacov** / pri teplote 18–25°C: **3 mesiace**.



Otvorená
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete zahriať na teplotu 18–25°C. Test je nutné vykonať do **2 hodín** od otvorenia kyvety. Vzorka v puferi je stabilná po dobu **2 hodín**.



Kontrolné
materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**.
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **2 mesiace**.



Kontrolný
materiál Hb

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**.
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **1 mesiac**.

Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko

Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel. +421 944 313 888

www.aidian.sk / www.quikread.sk

www.tackleamr.com / www.testcrp.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go wrCRP súprava s kapilárkami (10 µl) a piestikmi	146521
QuikRead go wrCRP+Hb súprava s kapilárkami (10 µl) a piestikmi	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl Capillaries	147851
QuikRead Plungers	67966
Prístroj QuikRead go	135867