




# QuikRead go wrCRP

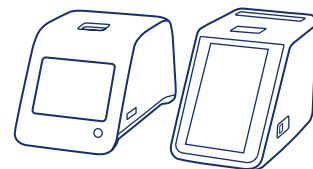


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

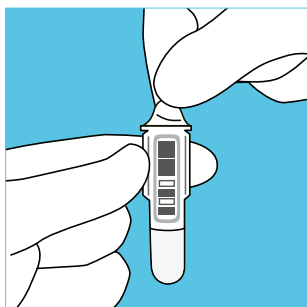


**1** Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

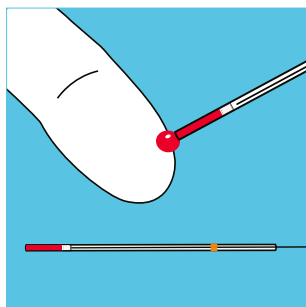


**2** Zostavte kapiláru s oranžovým prúžkom a odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (10 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

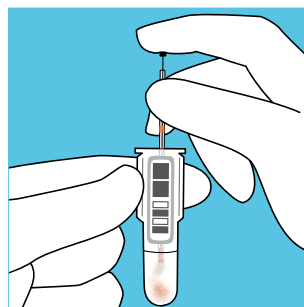


**3** Vložte kapiláru so vzorkou krvi (10 µl) do kyvety s puфом a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

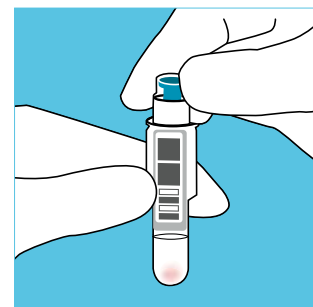


**4** Kyvetu pevne uzavrite tyrkysovým viečkom s reageniou. Netlačte na vnútornú farebnú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

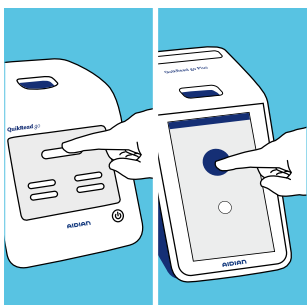

**5** Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky.

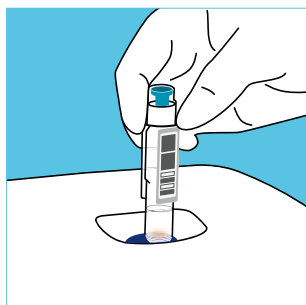


**6** Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.

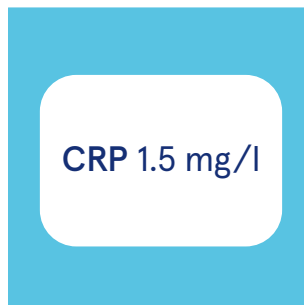

**7** Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

# QuikRead go wrCRP

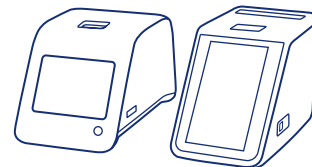

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravyTuba obsahujúca  
viečka  
s reagensiouNeotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy  
Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: 6 mesiacov

Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C:  
do dátumu expirácie súpravyNeotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote  
2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiaceOtvorená  
kyvetaPred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete vytemperovať na teplotu  
18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kyvety.  
Vzorka v pufri je stabilná po dobu 2 hodín.Kontrolné  
materiály CRPNeotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie  
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiace

## Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go wrCRP súprava s kapilármi (10 µl) a piestikmi	146521
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Capillaries 10 µl	147851
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375