




QuikRead go wrCRP+Hb

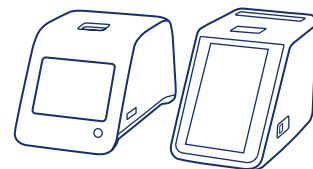


Pre QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument

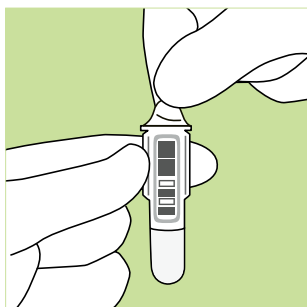


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

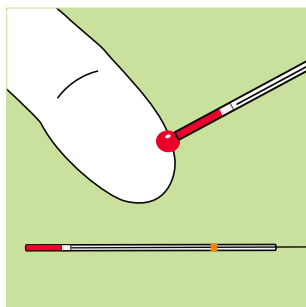


2 Zostavte kapiláru s oranžovým prúžkom a odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (10 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

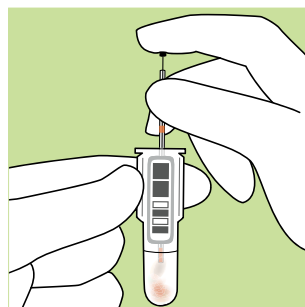


3 Vložte kapiláru so vzorkou krvi (10 µl) do kyvety s puфом a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

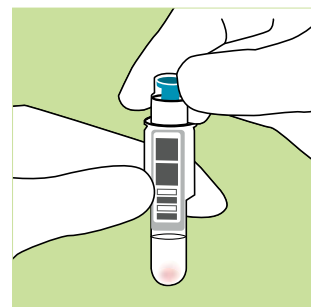


4 Kyvetu pevne uzavrite tyrkysovým viečkom s reageniou. Netlačte na vnútornú farebnú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.

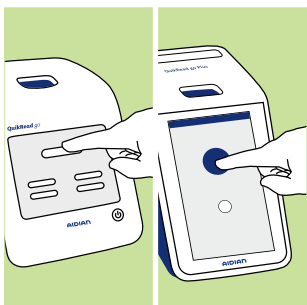

5 Na obrazovke prístroja QuikRead go zvolíte tlačidlo Meranie / Meranie vzorky.

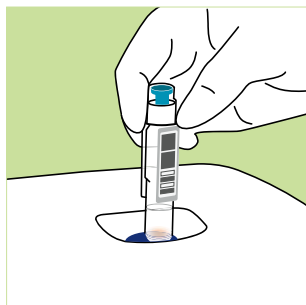


6 Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.

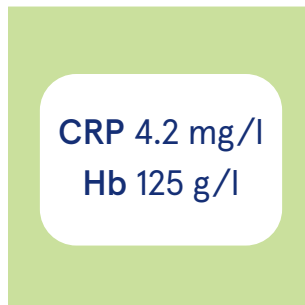

7 Čas merania je 2 minúty. Výsledok sa na obrazovke zobrazí po dokončení merania, kyveta sa automaticky vysunie.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go wrCRP+Hb

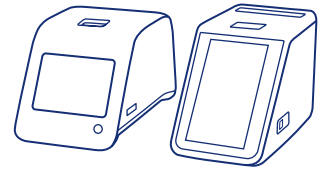

Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy



Tuba obsahujúca
viečka
s reagensiou

Neotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy
Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: 6 mesiacov



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C:
do dátumu expirácie súpravy

Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote
2–8°C: 6 mesiacov / pri teplote 18–25°C: 3 mesiace



Otvorená
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete vytemperovať na teplotu
18–25°C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia kyvety.
Vzorka v pufri je stabilná po dobu 2 hodín.



Kontrolné
materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 2 mesiace



Kontrolný
materiál Hb

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: 1 mesiac

Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.

info@aidian.sk / +421 944 541 700

quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go wrCRP+Hb súprava s kapilárkami (10 µl) a piestikmi	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go Capillaries 10 µl	147851
QuikRead Plungers	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375