



# QuikRead go<sup>®</sup> Konnektivität

Verbesserte Patientensicherheit, betriebliche Effizienz  
und Rückverfolgbarkeit

# Verbesserte Patientensicherheit, betriebliche Effizienz und Rückverfolgbarkeit

Ganz gleich, ob Ihr Ziel die schnelle, einfache und zuverlässige Übertragung der Ergebnisse in die Patientenakte oder die vollständige Verwaltung von patientennahen Tests ist, die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen von QuikRead go helfen Ihnen dabei!

Die Ergebnisse werden zusammen mit der Patienten- und Bedieneridentifikation sofort an das Labor- oder Krankenhausinformationssystem gesendet. Die bi-direktionale Steuerung der QuikRead go Instrumente gewährleistet durch ein leistungsfähiges Management- oder Middleware-System eine Testumgebung, welche den strengsten Vorschriften entspricht.

## Mehr Sicherheit für Ihre Patienten

- Automatische Übertragung von Ergebnissen verhindert manuelle Eingabefehler
- Übermittlung von Patientenlisten an das Instrument ermöglicht die korrekte Identifizierung der Patienten
- Kommentare können zu den Ergebnissen hinzugefügt werden

## Fernverwaltung von Benutzern


- Verwalten von Anwenderlisten
- Senden von Informationen an QuikRead go Anwendern

## Fernverwaltung von Instrumenten

- Sperren/Entsperren von QuikRead go Instrumenten
- Geräteeinstellungen und Uhrzeit anpassen
- QK-Grenzwerte einstellen
- Aktualisieren der Gerätesoftware
- Qualitätskontrollen aus der Ferne verfolgen
- Anzeigen von Instrumentenmeldungen

## Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten

- RJ-45-Netzwerkkabel oder drahtlose Verbindung mit einem WLAN-USB-Adapter
- Unidirektionale Verbindung mit LIS01-A2 oder bidirektionale Verbindung mit POCT1-A2

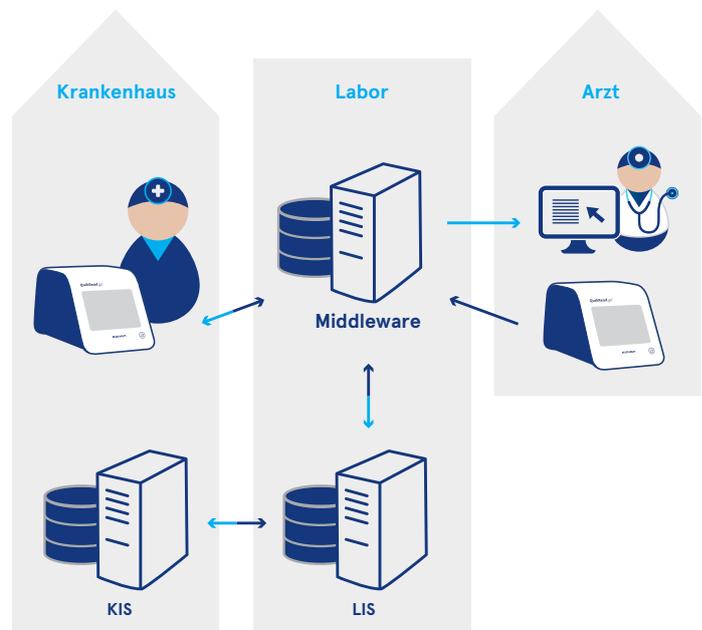

## Aidian Connect

- Mobile App für iOS- und Android-Mobilgeräte
- Macht Ihre QuikRead go Ergebnisse verfügbar und unterstützt Sie bei Ihren Behandlungsentscheidungenresult

## Kontaktinformationen

Aidian Germany GmbH / [info@aidian.de](mailto:info@aidian.de) / +49 6196 7700146  
Bestellungen an: [bestellung@aidian.de](mailto:bestellung@aidian.de)

[www.aidian.de](http://www.aidian.de) / [www.quikread.com](http://www.quikread.com)

Produkt	Artikelnr.
QuikRead go Instrument	133893
Drucker für das QuikRead go Instrument	155129
Barcode Reader für das QuikRead go Instrument	136204
QuikRead go WLAN Adapter	148045

# AIDIAN