



QuikRead go[®] -liitettävyys

Paranna potilasturvallisuutta, toiminnan tehokkuutta
ja jäljitettävyyttä

Paranna potilasturvallisuutta, toiminnan tehokkuutta ja jäljitettävyyttä

Olipa tavoitteesi nopea, helppo ja luotettava vieritestaustulosten siirtäminen potilastietoihin tai potilaan lähellä tapahtuvan testaamisen kattava hallinta, ovat QuikRead go -laitteen monipuoliset liitettävyysominaisuudet sitä varten!

Tulokset, yhdistettyinä potilaan ja käyttäjän tunnistukseen, lähetetään suoraan laboratorion tai sairaalan tietojärjestelmään. QuikRead go -laitteen kaksisuuntainen liitäntä yhdessä tehokkaan hallinta- tai väliohjelmistojärjestelmän kanssa varmistaa, että testausympäristö noudattaa sille asetettuja vaatimuksia.

Parempaa potilasturvallisuutta

- Lähetä tulokset automaattisesti manuaalisten virheiden vähentämiseksi
- Vastaanota potilaslista laitteeseen varmistaaksesi potilaan oikea tunnistaminen
- Lisää kommentteja tuloksiin

Käyttäjien etähallinta

- Hallitse käyttäjäluetteloita
- Lähetä tiedot QuikRead go -käyttäjille

Laitteiden etähallinta


- Lukitse/avaa QuikRead go -laite
- Säädä laitteen asetuksia ja aikaa
- Aseta laadunvalvontarajat
- Päivitä laitteen ohjelmisto
- Seuraa laadunvalvontaa etänä
- Näe laitteen viestit

Aidian Connect

- Mobiilisovellus saatavilla iOS- ja Android-laitteille
- QuikRead go -tulokset saatavilla nopeasti hoitopäätöksen tueksi

Monipuolinen liitettävyyys

- RJ-45 -verkkokaapeli tai langaton yhteys WLAN USB -sovittimella
- Yksisuuntainen yhteys LIS01-A2:lla tai kaksisuuntainen yhteys POCT1-A2:lla

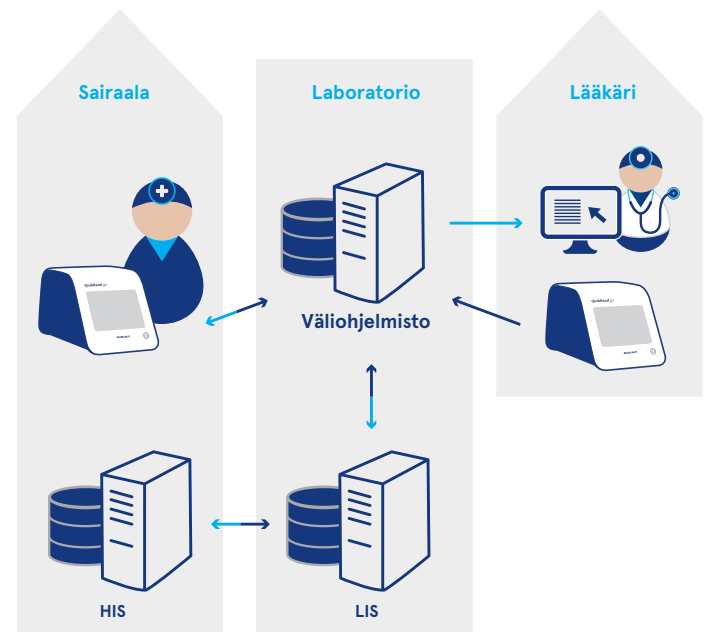

Yhteystiedot

Aidian Oy / info@aidian.fi / 050 380 9684
Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

www.aidian.fi / www.quickread.com

Tuote	Tuotenro
QuikRead go -laite	135867
Tulostin QuikRead go -laitteelle	155129
Viivakoodin QuikRead go -laitteelle	136204
QuikRead go WLAN-adapteri	148045

AIDIAN