

Kapcsolat

Aidian Oy Finnország
Képviselet HU, CZ, SK, PL:
Bělohorská 57, Prága, Csehország

Tel. +420 233 350 533

www.aidian.hu

| Termék | Kat. szám |
|------------------------------------|-----------|
| Easicult Combi PP 10 teszt | 05984 |
| Hygicult Y&F (Easicult M) 10 teszt | 68013 |
| Easicult TTC PP 10 teszt | 05988 |
| Cultura M 230 V | 05866 |
| Hőmérő (tartozék) | 05724 |
| Állvány (tartozék) | 139248 |




A Cultura M inkubátor 25–45 °C hőmérsékleten történő egyszerű és praktikus helyszíni tenyésztésre szolgál. Hőmérő, továbbá több kémcső egyszerű inkubálására alkalmas állvány is kapható.

Könnyedén használható!



Merítés vagy kenet

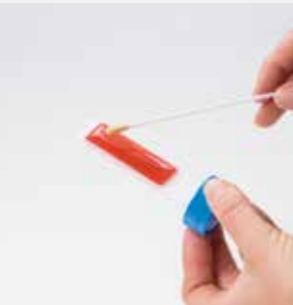

Inkubálás



Értékelés

Mikroorganizmusok megfékezése különböző iparágakban.

Easicult®



AIDIAN

www.aidian.hu

AIDIAN

Mikroorganizmusok megfékezése különböző iparágakban.

Az Easicult lemezes tenyésztési módszer az ipari folyadékok mikrobiológiai szennyezettségének monitorozására szolgál. A teszt egyszerűen elvégezhető a helyszínen, mikrobiológiai ismeretek nélkül, és a lemezek kényelmesen használhatók szállítási közegként is, ha a minták további elemzése szükséges.

Elérhető termékek

Az Easicult® Combi az általános higiénia monitorozására használható. A TTC közeg a teljes baktériumszám meghatározására, míg a Rose Bengal közeg az élesztő- és a penészgombák kimutatására szolgál. A polipropilén (PP) csöves termék hosszabb stabilitást biztosít, a polisztirol (PS) csöves pedig változó hőmérsékleti körülmények között ideális.

Az Hygicult® Y&F (Easicult M) a gombás szennyeződések kimutatására szolgáló malátaagart tartalmaz.

Az Easicult® TTC a teljes baktériumszám meghatározására szolgáló TTC közeget tartalmaz.

Megbízható

- Az egész világon használt kiváló minőségű termékek
- Bevált módszer hosszú évek tapasztalatával



Időtakarékos

- Három egyszerű művelet: merítés, inkubálás és értékelés
- Nem szükségesek mikrobiológiai ismeretek vagy speciális képzések
- Az eredmények értékelése egyszerű, nem szükséges a telepek számlálása

1-2-3

Rugalmas

- Tenyésztőlemezekhez képest hosszú felhasználhatósági idő
- Szállítható
- Szobahőmérsékleten tárolható
- Az inkubálás végezhető szobahőmérsékleten vagy a gyorsabb eredmények érdekében inkubátorban



Felhasználás

- Papíripari folyadékok
- Fémipari folyadékok
- Ipari vágófolyadékok
- Üzemanyagok, kenőolajok, dízel- és biodízelolajok
- Festékek, pigmentek, lakkok
- Autók és más gépjárművek gyártása
- Hűtőtorony, hűtővíz
- Kozmetikumok gyártása
- Üzemanyagtartályok: repülőgép gyártás, hajók és motorcsónakok