

Hygicult Y&amp;F (Easicult M)

Hygicult E/β-GUR

Hygicult E

Hygicult TPC

# Egyszerű felületi higiéniai ellenőrzés.

## Hygicult® Model Chart

## Hygicult®

Szilárd és folyékony anyagok mikrobiális higiénijának ellenőrzésére.

Tárolás 18–25°C-on, huzat és hőmérséklet ingadozástól mentes helyen.

A baktériumok kimutatási tartománya  $10^3$ – $10^7$  CFU/ml folyadékokban vagy 1–100 CFU/cm<sup>2</sup> felületeken.

### Hygicult TPC (Cat. no. 68010)

- Felhasználhatósági időtartam a gyártástól számított hat hónap.
- Inkubálás 35–37 °C-on 24 órán át, 27–30 °C-on 48 órán keresztül vagy 18–25 °C-on legfeljebb öt napig.

### Hygicult E (Cat. no. 68012), Hygicult E/β-GUR (Cat. no. 68267)

- Eltarthatósága a gyártástól számított öt hónap.
- Inkubálás 35–37 °C-on 24–48 órán keresztül.

### Hygicult Y&F (Easicult M) (Cat. no. 68013)

- Felhasználhatósági időtartam a gyártástól számított hat hónap.
- Inkubálás 27–30 °C-on 3–5 napig.
- Az élesztők kimutatási tartománya  $10^3$ – $10^6$  CFU/ml folyadékban vagy 1–80 CFU/cm<sup>2</sup> felületeken.

További részletekért kérjük, olvassa el a használati utasítást.

### Könnyedén használható!



Mártsa bele, nyomja rá vagy törölje le

Inkubálja

Értékelje


# Hygicult®

## Telep sűrűsége



### Hygicult TPC

Összes baktérium,  
élesztő és penész

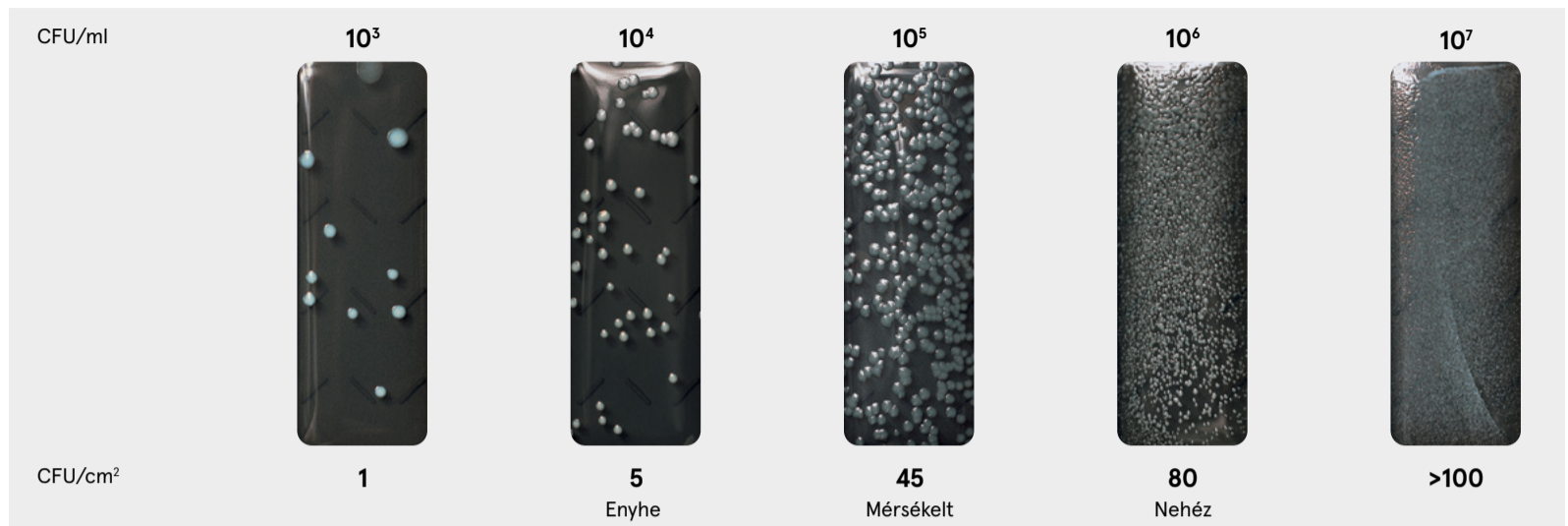


### Hygicult E

Összes baktérium,  
élesztő és penész



### Hygicult E/β-GUR

Növekedés β-GUR táptalajon

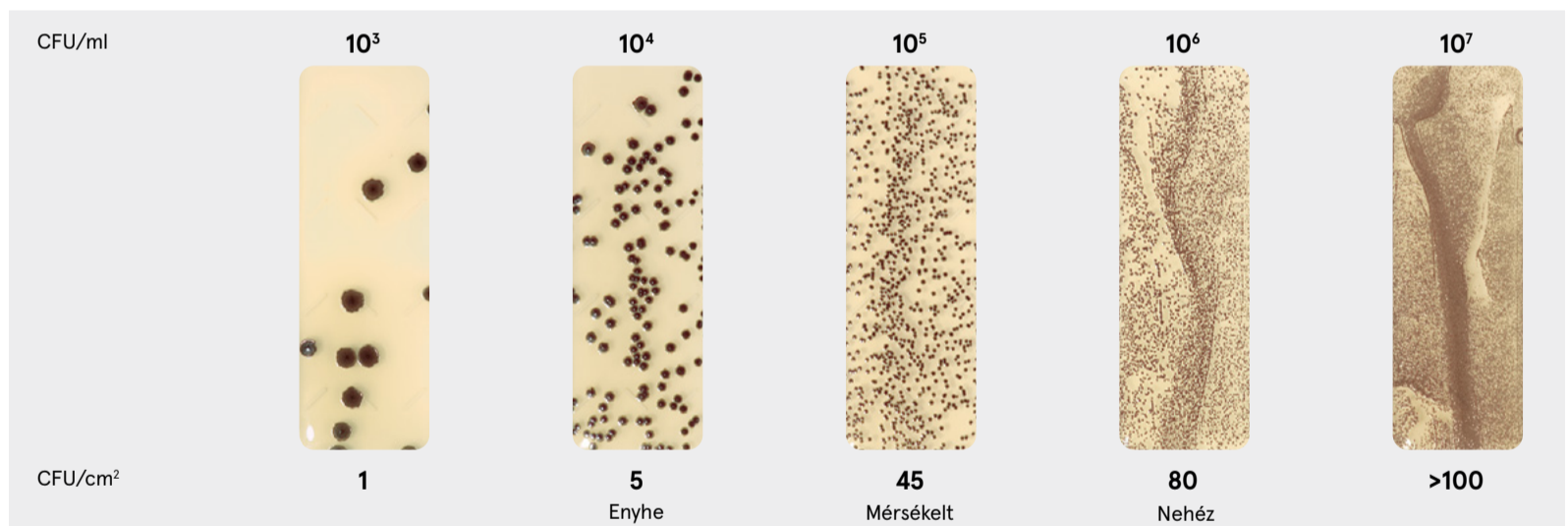

### Hygicult Y&F (Easicult M)

Élesztők és  
penészgombák

